

Quick Read Forehead





Be sure to follow the guidelines below and the complete instructions included with this product for warnings and how to operate.

Placement:

1. Locate reading site. The best reading sites for forehead thermometers are at the temples or just above the eyebrows. See Figure 1.
2. Locate the lens. Note the flat surface around the lens. See Figure 2.
3. Ensure the lens surface is parallel to forehead and that thermometer is 1/2 inch (about the width of an adult's finger) from reading site. ✓ See Figure 3.

Important Usage Tips:

- Never use a forehead thermometer on a sweaty forehead.
- Allow 60 seconds between readings for thermometer to properly re-set.

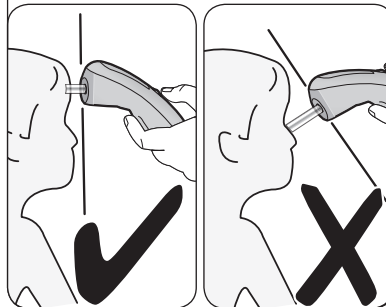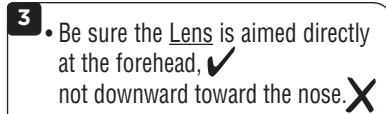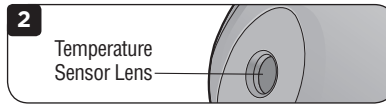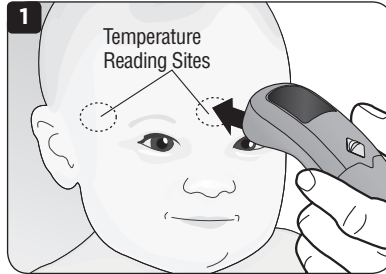

Frente de fácil lectura




Asegúrese de seguir las instrucciones de más abajo las instrucciones completas incluidas en este producto con las advertencias y cómo utilizarlo.

Colocación:

1. Localice el lugar de la lectura. Los mejores lugares de lectura para los termómetros de frente son la sien o justo arriba de las cejas. Vea la Figura 1.
2. Localice la lente. Observe la superficie plana alrededor de la lente. Vea la Figura 2.
3. Asegúrese de que la superficie de la lente esté paralela a la frente y que el termómetro esté a 1/2 pulgadas (aproximadamente el ancho del dedo de un adulto) del lugar de lectura. ✓ Vea la Figura 3.

Importantes Consejos de Uso:

- Nunca use un termómetro de frente sobre una frente húmeda
- Deje pasar 60 segundos entre una lectura y otra para que el termómetro se reinicie adecuadamente

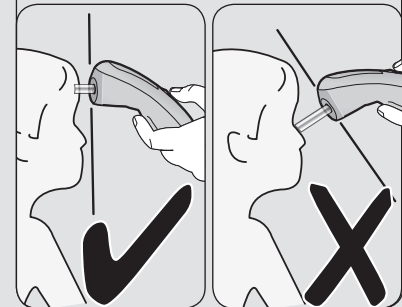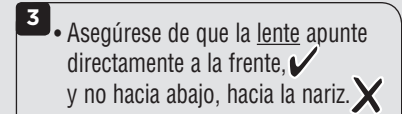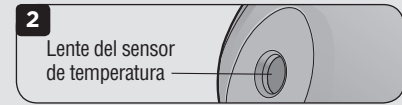

TH068, TH073



©2017 Dorel Juvenile Group. Columbus, IN 47201-7494 To reach Consumer Relations call: (800) 514-1108. Have ready the model number (TH068, TH073) and Lot# located on silver label on back of thermometer.

Llame al Departamento de Atención al Cliente al (800) 514-1108. Tenga a mano el número del modelo (TH068, TH073) y Lote# en la etiqueta de plata en la parte posterior del termómetro.

12/20/16 4358-7070