

Important: Be sure to retain this manual for future reference and read it completely before using the Evenflo Silicone Steam Sanitizing Bag.

CAUTION: Use care when removing from microwave as bag will be filled with hot water and steam after use, which could cause burns. DO NOT tip the bag when removing from the microwave.

⚠ WARNINGS


- For adult use only.
- To avoid suffocation keep this bag away from babies and children. This bag is not a toy. DO NOT use in cribs, beds, carriages or play pens. Cut bag along edge before discarding.
- Evenflo Silicone Steam Sanitizing Bag is to be used with parts that are microwave-safe only. DO NOT place the steam bag on a microwave metallic grill. DO NOT place the bag in convection oven or on an oven grill.
- Be sure to follow the provided Heating Time Chart on reverse side as heating for longer than the recommended time may warp bag contents. Use of less than 2oz (60mL) of water may warp bag contents.
- Discard Silicone Steam Sanitizing Bag at first sign of weakness, tears, or damage.
- Avoid placing sharp objects in or on the bag, as they may damage the bag.
- Follow the manufacturer's instructions for use of your microwave.

BEFORE FIRST USE

Wash thoroughly in warm, soapy water or wash in the dishwasher. Rinse and dry thoroughly.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Add 2 ounces (60mL) of water to the bag.
2. Place clean, microwave-safe nipples, pacifiers, bottles or pump parts into the sanitization bag.
NOTE: Soiled items must be washed prior to placing in sanitization bag.
3. Ensure each button **A** on the bag is secured tightly.
NOTE: DO NOT overload bag (if any of the buttons cannot be tightly secured, the bag is overloaded, and item(s) should be removed until the bag can seal correctly).
4. Reference Heating Time Chart on reverse side.
5. **After microwaving, allow bag to cool to room temperature before handling the bag.**
6. Carefully remove bag from microwave by pinching the top outer **B** corners on each side of the bag.
7. If the bag becomes soiled, wash with warm, soapy water or in the dishwasher to clean.
8. Let the bag dry completely before storing.

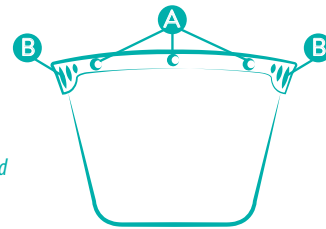

Patent Pending

Important: Assurez-vous de conserver ce manuel pour référence ultérieure et de le lire en entier avant d'utiliser le sac à vapeur en silicone Evenflo.

MISE EN GARDE : Soyez prudent lorsque vous retirez le sac du four à micro-ondes, puisqu'il sera rempli d'eau chaude et de vapeur, et pourrait provoquer des brûlures. N'INCLINEZ PAS le sac en le sortant du micro-ondes.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Pour utilisation par un adulte seulement.
- Afin d'éviter la suffocation, gardez ce sac loin des bébés et des enfants. Ceci n'est pas un jouet. N'UTILISEZ PAS dans des berceaux, des lits, des poussettes ou des parcs pour bébés. Coupez le sac le long du bord avant de le jeter.
- Le sac de désinfection à la vapeur doit être utilisé avec des pièces qui peuvent aller au four à micro-ondes seulement. Ne pas mettre le sac à vapeur sur la grille métallique dont certains fours à micro-ondes sont pourvus. Ne pas mettre le sac dans un four conventionnel ou sur la grille du four.
- Assurez-vous de suivre le graphique du temps de réchauffage fourni, puisque réchauffer plus longtemps que la durée recommandée peut déformer les pièces. Avec une utilisation de moins de 2 oz (60 mL) d'eau, le contenu du sac peut être déformé.
- Jetez le sac de désinfection à la vapeur dès les premiers signes de faiblesse ou de dommages.
- Évitez de placer des objets pointus dans ou sur le sac, puisque cela pourrait l'endommager.
- Suivez les instructions pour votre four à micro-ondes.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Veillez à bien laver toutes les pièces avec de l'eau tiède savonneuse. Rincez et séchez complètement.

MODE D'EMPLOI

1. Ajoutez 2 oz (60mL) d'eau dans le sac.
2. Placez les tétines, les sucettes, les biberons ou les pièces du tire-lait, propres et allant au micro-ondes, dans le sac de désinfection.
REMARQUE : Les articles souillés doivent être lavés avant d'être placés dans le sac de désinfection.

3. Assurez-vous que tous les boutons **A** du sac sont solidement fixés.
REMARQUE : NE PAS surcharger le sac (s'il y a des boutons qui ne peuvent pas être solidement fixés, cela signifie que le sac est trop plein. Des articles doivent être enlevés du sac, jusqu'à ce que celui-ci puisse être scellé hermétiquement.)


4. Référence le graphique du temps de réchauffage ci-dessous.

5. Après le micro-ondes, laissez le sac refroidir à température ambiante avant de le manipuler.

6. En pinçant les coins supérieurs extérieurs de chaque côté du sac, **B** retirez avec précaution le sac du micro-ondes.

7. Si le sac devient souillé, lavez-le avec de l'eau tiède et savonneuse ou placez-le au lave-vaisselle.

8. Laissez le sac sécher avant de le ranger pour une utilisation ultérieure.

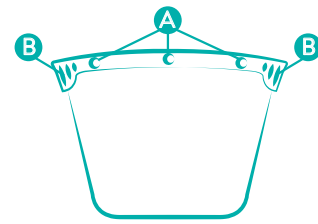

Brevet en instance

Importante: Asegúrese de guardar este manual para futuras referencias y léalo en su totalidad antes de usar las bolsa de vapor de silicona de Evenflo.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al retirar el producto del horno de microondas ya que la bolsa estará llena de agua caliente y de vapor después de usarla, esto podría causar quemaduras. NO incline la bolsa mientras la saca del microondas.

⚠ ADVERTENCIAS

- Solo para uso de adultos.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños. No es un juguete. NO lo use en cunas, camas, carruajes o corrales de juego. Corte la bolsa a lo largo del borde antes de desecharla.
- La bolsa de desinfección al vapor se debe usar solo con piezas que sean seguras para el horno de microondas. No coloque la bolsa en la parrilla metálica que tienen algunos hornos de microondas. No coloque la bolsa en un horno convencional o en una parrilla de horno.
- Asegúrese de seguir la Tabla de tiempo de calentamiento que se incluye, ya que hacerlo por más tiempo que el recomendado puede distorsionar la forma de las piezas. El uso de menos de 60 mL (2 oz) de agua puede deformar el contenido de la bolsa.
- Deseche la bolsa de desinfección al primer signo de daño.
- Evite colocar objetos punzantes dentro o sobre la bolsa, ya que pueden dañarla.
- Siga las instrucciones del horno de microondas.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

Lave bien con agua tibia y jabón. Enjuague y seque bien.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agregue 60 mL (2 oz) de agua a la bolsa.

2. Coloque chupones, chupetes, biberones o piezas de la bomba limpios y aptos para el microondas en la bolsa de desinfección.

NOTA: Los artículos sucios deben lavarse antes de colocarlos en la bolsa de desinfección.

3. Asegúrese de que cada botón **A** de la bolsa esté bien sujeto.

NOTA: No sobrecargue la bolsa (Si algunos de los botones no se pueden asegurar firmemente, la bolsa está muy llena, y el/los artículo(s) debe(n) ser retirado(s) hasta que la bolsa pueda cerrarse correctamente).


4. Consulte el tabla de tiempo de calentamiento de abajo.

5. Después de calentar en el microondas, deje que la bolsa se enfríe a temperatura ambiente antes de manipularla.

6. Retire cuidadosamente la bolsa del microondas sosteniéndola por las esquinas exteriores superiores **B** a cada lado de la bolsa.

7. Si la bolsa se ensucia, lávela con agua tibia y jabón o en el lavaplatos para limpiarla.

8. Deje secar la bolsa antes de guardarla para volver a usarla.

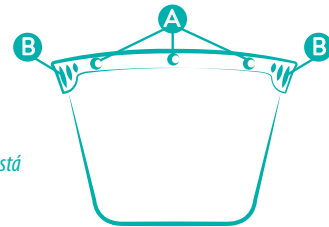

Patente en trámite

HEATING TIME CHART

Graphique du temps de réchauffage | Tabla de tiempo de calentamiento

OVER 1100 WATTS PLUS DE MÁS DE	800-1100 WATTS	500-720 WATTS
90 seconds 90 secondes segundos	3 minutes 3 minutes minutos	5 minutes 5 minutes minutos