



MOBILITY DESIGNED

AIR-GO™

Walker

Déambulateur

Andador

Instructions For Use

Instructions D'utilisation

Instrucciones De Uso



Item # / Article n° / Artículo n.º:


MD30100BK, MD30100BL

VER.A.6.25

Where Real Life Inspires Innovation

Designed with insight from real lives, elevated by next-generation engineering and innovative materials — because everyday support should feel extraordinary.

- The M+D by Drive® Team

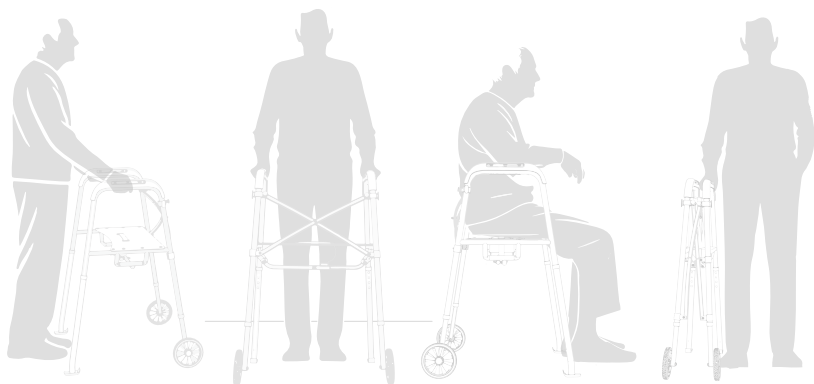

Parts List

1 Air Handle Grip

2 Seat

3 Seat strap

4 Cross bar

5 Cross bar
locking clip

6 Cross bar lever

7 Scissor frame

8 Left frame upper

9 Left front leg

10 Left wheel

11 Right rear leg

12 Left rear leg

13 Right frame
upper

14 Right front leg


15 Right wheel

16 Glide Ski

17 Accessory clip

18 Bag clip

19 Snap button

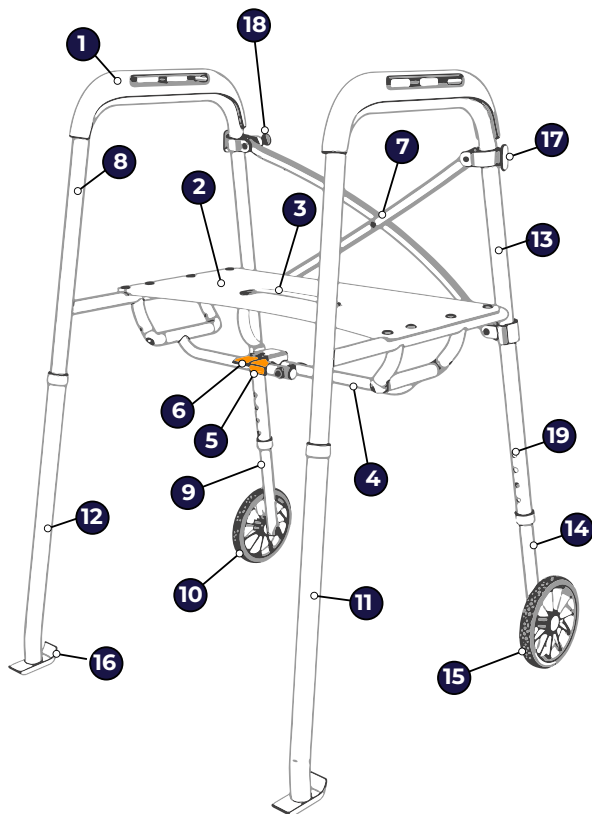

WEIGHT CAPACITY: 300 LB / 136 KG

USER HEIGHT: 4'9" - 6'7" (1.44 m - 2.0 m)


Instructions





Tutorial Videos

Scan QR code for link to tutorial videos

- 1 Assembly:** Click in the legs. Legs with wheels go in the front, and legs with skis go in the back.
NOTE: Wheels should be on outside of the leg, facing away from the middle of walker to help align the letter on the leg with the correct hole for each leg.

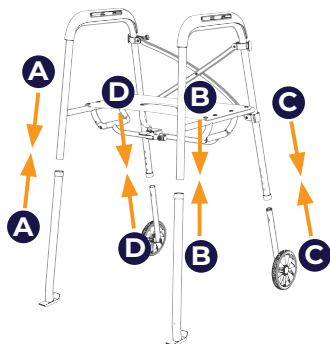


- 2** To open the walker for walking mode, pull the handles away from each other. Push down on the seat or cross bar lever, to help open the walker.

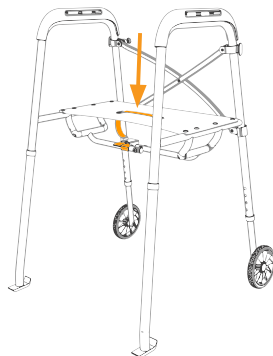
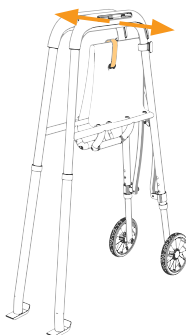


Instructions

- 3** To lock the walker in the open position, push down on the orange lever under the seat. You should feel a click as the cross bar locks in position.

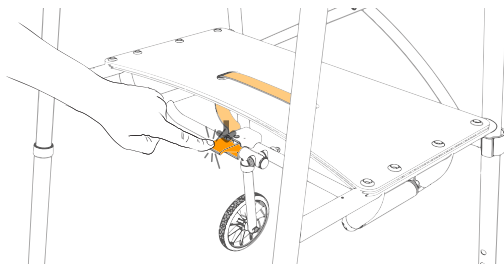


- 4** To fold the walker, pull the orange lever located on the cross bar under the seat upwards, and then pull up on the seat strap to fold the walker.

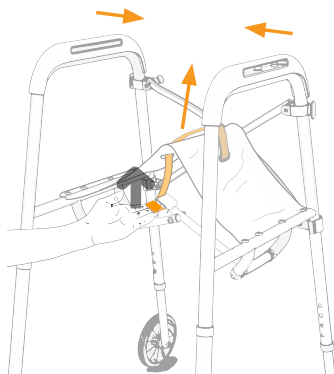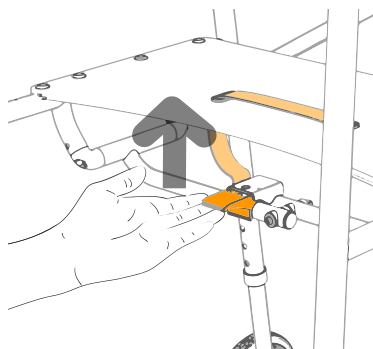



Instructions

- 5 Seat Mode:** The Air-Go Walker™ should only be used as a seat on stable, level surfaces. Only use the seat when the walker is open and the cross bar is locked. Seat height can be adjusted by adjusting leg length. All legs should be at the same height for use.

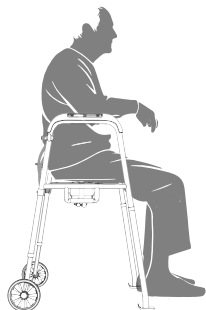

Height Adjustment

- 1** The ideal ergonomic height for a user is one in which the user is not bending over to reach the handles, but is in a stable vertical position with their elbows slightly bent to touch the handles.
- 2** Push the snap button on each leg and extend or retract the leg tubes to desired height.
- 3** To lock the walker in the open position, push down on the orange lever under the seat. You should feel a click as the cross bar locks in position. NOTE: The seat height changes depending on the overall height of the walker. You may want to adjust the height differently for sitting or walking.

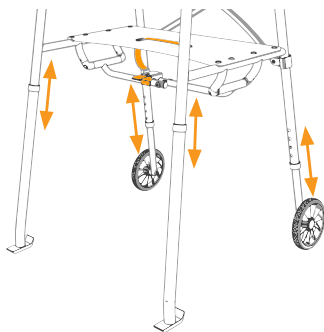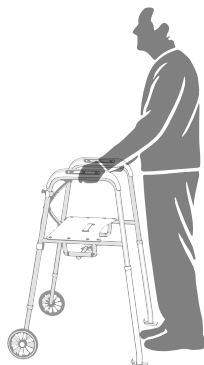

Maintenance and Cleaning

Brush off dust and dirt or wipe with a damp cloth.

M+D by Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more information.

Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement. If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



Storage Bag
102662-BAG



Cup Holder
102662-CUP



Cane Holder
MD30100-CANE




**Air-Go™ Walker
Accessories:**

Scan QR code for link

Quand La Vraie Vie Inspire L'innovation


Conception inspirée de la vraie vie, amélioration grâce à une ingénierie de nouvelle génération et à des matériaux innovants — parce que l'aide au quotidien se doit d'être extraordinaire.

- Le M+D par l'équipe Drive®

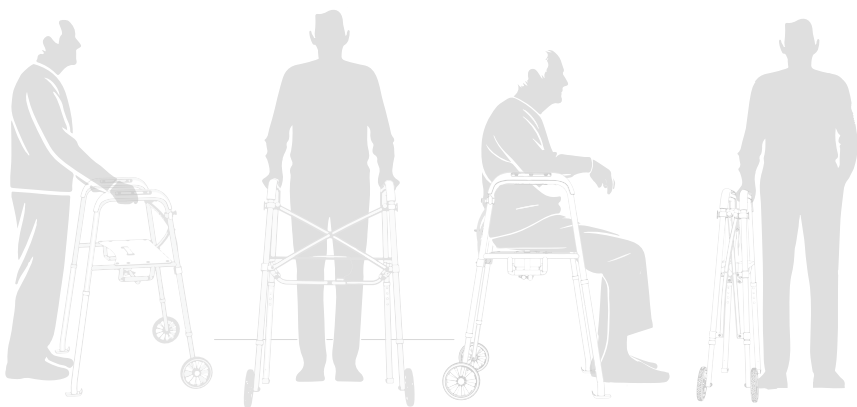

Liste des pièces

- 1 Poignée pneumatique
- 2 Siège
- 3 Sangle de siège
- 4 Barre transversale
- 5 Clip de verrouillage de barre transversale
- 6 Levier de barre transversale
- 7 Cadre en forme de ciseaux
- 8 Cadre supérieur gauche
- 9 Jambe avant gauche
- 10 Roue gauche
- 11 Jambe arrière droite
- 12 Jambe arrière gauche
- 13 Cadre supérieur droit
- 14 Jambe avant droite
- 15 Roue droite
- 16 Patin-ski
- 17 Clip pour accessoires
- 18 Clip pour sac
- 19 Bouton pression

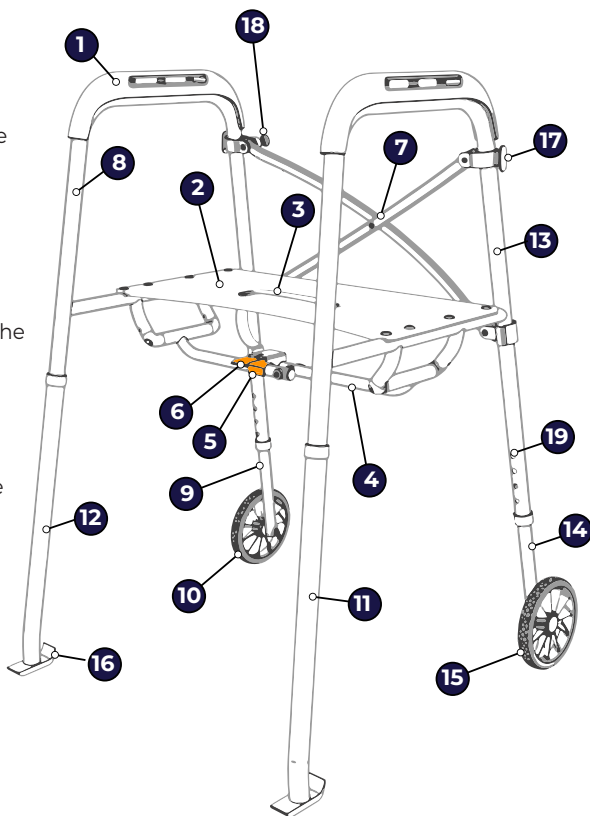

Capacité de poids: 136 kg (300 lb)

Taille de l'utilisateur: 1,44 m - 2,0 m (4 pi 9 po - 6 pi 7 po)


Instructions d'assemblage





Vidéos tutoriels

Balayez le code QR pour obtenir un lien vers les vidéos tutoriels

- Assemblé:** Enclenchez les pieds. Les pieds munis de roues se placent à l'avant, tandis que ceux avec des patins se positionnent à l'arrière.
 Remarque : Les roues doivent se trouver à l'extérieur de la jambe, face au milieu du déambulateur. Permet d'aligner identifié par une lettre sur le pied avec le trou correspondant à chaque pied.

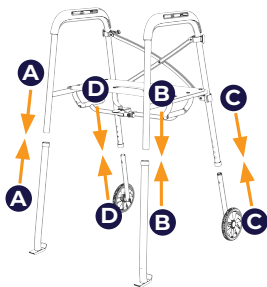


- Pour ouvrir le déambulateur en mode marche, écartez les poignées l'une de l'autre. Appuyez sur le levier du siège ou de la barre transversale pour ouvrir le déambulateur.

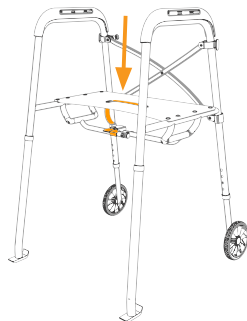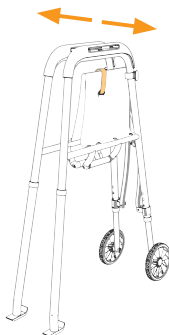


Instructions d'assemblage

- 3** Pour verrouiller le déambulateur en position ouverte, appuyez sur le levier orange sous le siège. Vous devriez sentir un déclic lorsque la barre transversale se verrouille en position.

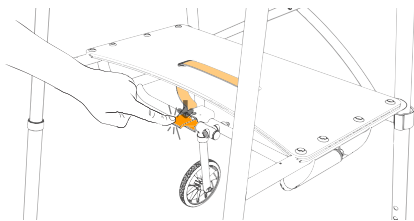


- 4** Pour le déambulateur pliable à ciseaux, utilisez le levier orange sous le siège pour ouvrir et fermer le déambulateur. Dépliage/ouverture pour utilisation: Pousser le levier orange vers le bas jusqu'à entendre ou sentir un « déclic » pour ouvrir et verrouiller le déambulateur. Pliage ou rangement: Tirer le levier orange situé sur la barre transversale sous le siège vers le haut, puis tirer sur la sangle du siège pour plier le déambulateur.

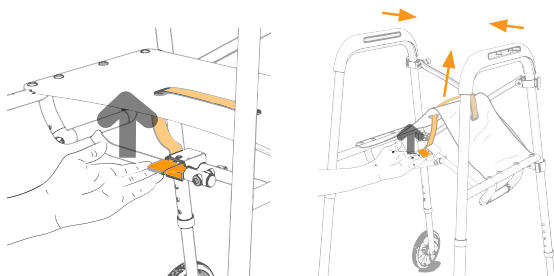


- 5 Mode siège:** L'Air-Go Walker™ ne doit être utilisé comme siège que sur des surfaces stables et planes. Utiliser le siège uniquement lorsque le déambulateur est ouvert et que la barre transversale est verrouillée.

La hauteur du siège peut être ajustée en réglant la longueur de la jambe. Tous les pieds doivent être à la même hauteur pour être utilisés.

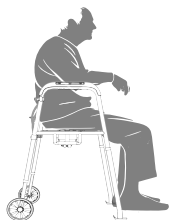

Réglage de la hauteur

- 1** La hauteur ergonomique idéale permet à l'utilisateur de rester bien droit, sans se pencher pour atteindre les poignées, avec les coudes légèrement pliés au contact des poignées.
- 2** Appuyer sur le bouton-pression de chaque jambe et déployer ou rétracter les tubes de jambe à la hauteur souhaitée.
- 3** S'assurer que chaque bouton-pression est dans la même position sur chaque jambe pour une utilisation stable et uniforme. Remarque : La hauteur du siège change en fonction de la hauteur globale du déambulateur. Vous pouvez ajuster la hauteur différemment pour vous asseoir ou marcher.

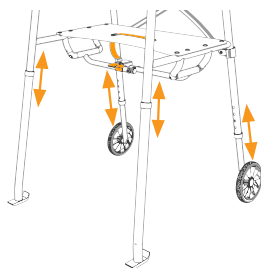

Entretien et nettoyage

Enlever la poussière et la saleté en les brossant ou les essuyer avec un chiffon humide.

MD by Drive recommande à l'utilisateur de procéder à une inspection visuelle périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les parties et pièces sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés, et qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'obstacles à l'utilisation normale et sécuritaire. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site www.drivemedical.com/help pour obtenir de plus amples renseignements.

Garantie limitée à vie

Votre produit de marque MD by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil MD by Drive ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive autorisé.



Sac de rangement
102662-BAG



Porte gobelet
102662-CUP



Porte-canne
MD30100-CANE



Accessoires : Vous trouverez l'**'Air-Go Walker™** en balayant le code QR affiché ci-dessus.


ES

Donde La Vida Real Inspira A La Innovación

Donde La Vida Real Inspira A La Innovación


Diseño acorde a perspectivas de vidas reales, elevado con tecnología de la próxima generación y materiales innovadores, porque el soporte diario debe sentirse extraordinario.

- El equipo de M+D by Drive®

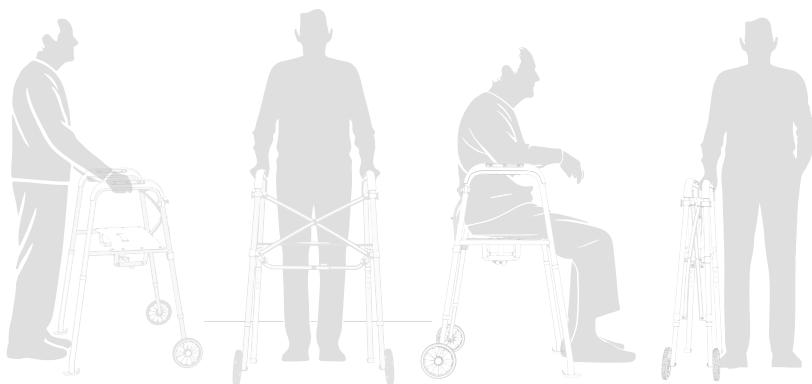

Lista de piezas

- 1 Empuñadura de aire
- 2 Asiento
- 3 Correa del asiento
- 4 Barra transversal
- 5 Bloqueador de seguridad de la barra transversal
- 6 Palanca de la barra transversal
- 7 Marco en forma de tijera
- 8 Parte superior izquierda del marco
- 9 Pierna delantera izquierda
- 10 Rueda izquierda
- 11 Pierna trasera derecha
- 12 Pierna trasera izquierda
- 13 Parte superior derecha del marco
- 14 Pierna delantera derecha
- 15 Rueda derecha
- 16 Esquí de deslizamiento
- 17 Gancho para accesorios
- 18 Gancho para bolsa
- 19 Botón de presión

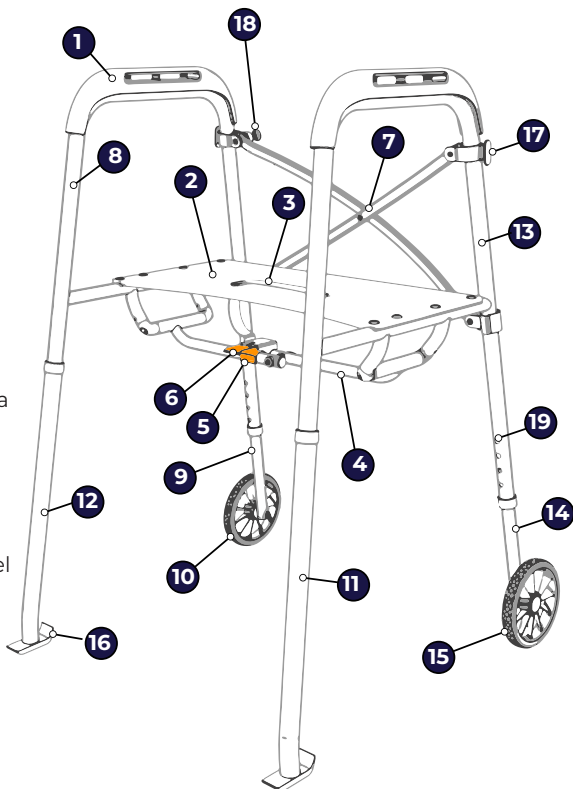

Capacidad de peso: 136 kg/300 lb

Altura del usuario: 1,44 m - 2,0 m (4'9" - 6'7")


Instrucciones




Videos tutoriales:

Escanee el código QR para obtener un enlace a videos tutoriales:

- 1 Asamblee:** Haga clic en las patas. Las patas con ruedas van en la parte delantera y las patas con esquís en la parte trasera.
Nota: Las ruedas deben estar en el exterior de la pata, mirando en dirección contraria al centro del andador. Para ayudar a alinear con la letra de la pata con el orificio correcto para cada pata.

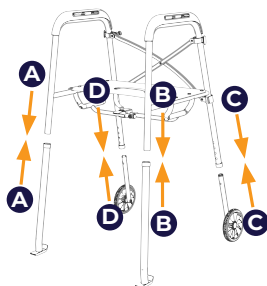


- 2** Para abrir el andador y prepararlo para el modo de marcha, tire de los mangos para separarlos uno de otro. Empuje hacia abajo el asiento o la palanca de la barra transversal para abrir el andador.


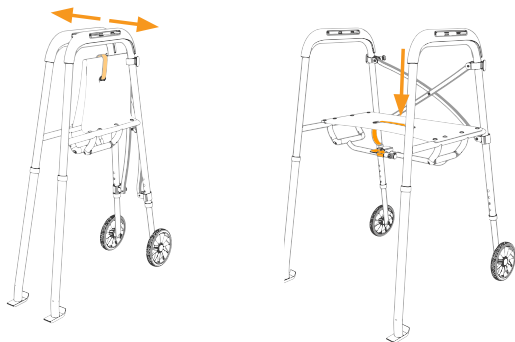


Instrucciones

- 3** Para que el andador quede en posición abierta, empuje hacia abajo la palanca naranja debajo del asiento. Debe sentir un clic mientras la barra transversal se bloquea en su posición.

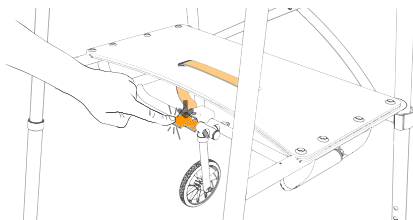

- 4** Para el andador plegable tipo tijera, use la palanca naranja debajo del asiento para abrirlo y cerrarlo. Despliegue/apertura para su uso: Empuje la palanca naranja hacia abajo hasta oír o sentir un “clic” para abrir y bloquear el andador. Pliegue o almacenamiento: Tire hacia arriba de la palanca naranja ubicada en la barra transversal debajo del asiento y luego levante la correa del asiento para plegar el andador.

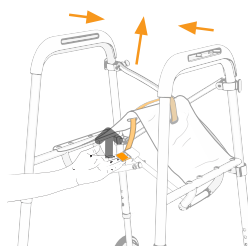
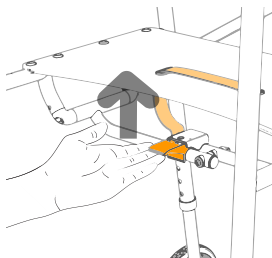


- 5 Modo asiento:** El Air-Go Walker™ solo debe usarse como asiento en superficies estables y niveladas. Utilice el asiento únicamente cuando el andador esté abierto y la barra transversal esté bloqueada. La altura del asiento se puede regular ajustando la longitud de las patas. Todas las patas deben estar a la misma altura para su uso.



Ajuste de altura

- 1** La altura ergonómica ideal para un usuario es aquella en la que el usuario no se inclina para alcanzar los mangos, sino que se encuentra en una posición vertical estable con los codos ligeramente doblados para tocar los mangos.
- 2** Presione el botón a presión en cada pata y extienda o retraiga los tubos de las patas a la altura deseada.
- 3** Asegúrese de que cada botón esté en la misma posición en cada pata para un uso estable y nivelado.
Nota: La altura del asiento cambia según la altura total del andador. Es posible que desee ajustar la altura de manera diferente para sentarse o caminar.

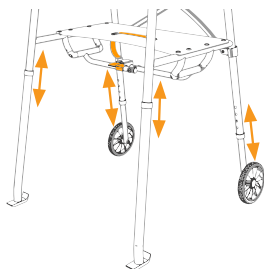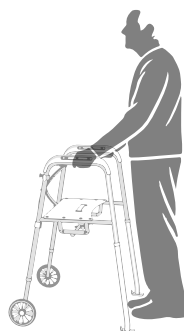

Mantenimiento y limpieza

Cepíllelo para sacar el polvo y la suciedad o límpielo con un paño húmedo.

MD by Drive recomienda que el usuario realice inspecciones visuales periódicas de este producto para asegurarse de que todas las piezas y herrajes estén bien sujetos, que los componentes estén en buenas condiciones y no estén desgastados, rotos, rasgados, flojos ni oxidados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

Garantía limitada de por vida

Su producto de la marca MD de Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.


Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, ruedas y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo MD by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.



Accesorios: El Air-Go Walker™
se puede encontrar en el enlace
al que lleva el código QR anterior.

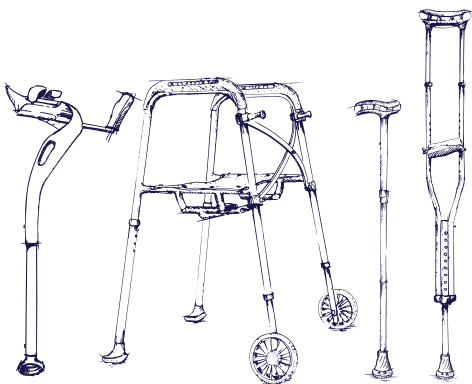

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
All rights reserved.

Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
Todos los derechos reservados.

Mobility Designed® es una marca registrada de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.
Hecho en China

2025 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom
de Drive DeVilbiss Healthcare.
Tous droits réservés.

Mobility Designed® est une marque déposée de Medical
Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis
Fabriqué en Chine