

**Important:** Be sure to retain this manual for future reference and read it completely before using Evenflo Milk Storage Bag Adapters. Refer to your pump manual for additional instructions and warnings.

## BEFORE FIRST USE AND AFTER EACH USE

For best results and to avoid potential damage, hand wash (avoid boiling and high temperature dish washing). Thoroughly dry before use. This product contains metal - **DO NOT MICROWAVE.**

## INSTRUCTIONS FOR USE


### Installation:

1. Screw adapter **A** into pump flange base **B**.
2. Pinch adapter clips to open position.
3. Slide open milk storage bag (not included) **C** between clips with adapter funnel below zipper.
4. Release adapter clips to closed position.

### Removal:

1. Hold flange with one hand around the clip area – this same hand will be used to open clips.
2. Press open clips and slide bag down, off of the adapter.
3. Put flange down and seal milk storage bag according to instructions provided by your milk storage bag manufacturer.

*Note: If double pumping, you can secure one flange to your body with your forearm while removing the other flange from your breast with the same hand. Follow Steps 1-3 above.*

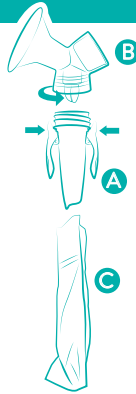

**WARNING:** DO NOT use this product if it is broken or any parts are missing. The spring clips are a potential pinch point. Contains small parts which could pose a choking hazard to small children. Keep pump parts and accessories out of children's reach. Pump and accessories are personal care items, for one user only.

**Important:** Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser les adaptateurs à la fine pointe de la technologie pour sacs de conservation de lait, et conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement. Pour des instructions et des mises en garde additionnelles, veuillez vous référer à votre manuel du tire-lait.

## AVANT ET APRÈS CHAQUE UTILISATION

Pour de meilleurs résultats et pour prévenir des dommages potentiels, laver à la main et éviter de laver au lave-vaisselle à température élevée ou à eau bouillante. Sécher soigneusement avant l'utilisation. Ce produit contient du métal - **NE PAS MICRO-ONDES.**

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION


### Installation:

1. Vissez l'adaptateur **A** dans la base du manchon du tire-lait **B**.
2. Pincez les pinces de l'adaptateur en position ouverte.
3. Glissez le sac de conservation de lait (non inclus) **C** entre les pinces et l'entonnoir de l'adaptateur sous la fermeture à glissière.
4. Dégagez les pinces de l'adaptateur à la position fermée.

### Pour enlever:

1. Tenez le manchon avec une main autour de la pince.
2. Avec l'autre main, maintenez le sac.
3. Déposez le manchon et scellez le sac de conservation de lait selon les instructions fournies par le fabricant du sac.

*Remarque : Si vous utilisez un tire-lait double, vous pouvez maintenir un manchon de sein à votre corps avec votre avant-bras tout en enlevant l'autre manchon de votre sein avec la même main. Veuillez suivre les étapes 1 à 3 ci-dessus pour dégager le sac de conservation de lait de l'adaptateur Evenflo.*

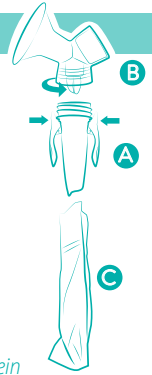

**AVERTISSEMENT:** NE PAS utiliser ce produit s'il est brisé ou si une pièce est manquante ou devient endommagée. Les pinces à ressort peuvent constituer un point de pincement. Contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation aux petits enfants. Garder les pièces et les accessoires hors de l'atteinte des enfants. Les pompes et accessoires sont des articles de soins personnels, pour un seul utilisateur.

**Importante:** Asegúrese de guardar este manual de uso para una referencia futura. Lealo completamente antes de utilizar el Adaptador de las Bolsas para Almacenar Leche Evenflo. Consulte el manual para obtener información adicional y conocer las advertencias del producto.

## ANTES Y DESPUÉS DE CADA USO

Para mejores resultados, lave las partes a mano y evite hervir o usar temperaturas altas en el lavavajillas pues puede dañar el producto. Verifique que seque las partes por completo antes de usar. Este producto contiene metal - **NO MICROONDAS.**

## INSTRUCCIONES DE USO


### Instalación:

1. Enrosque el adaptador **A** a la base **B**.
2. Presiones los clips hasta que estén abiertos.
3. Coloque las bolsas de almacenamiento de leche (no incluido) **C** entre los clips con el adaptador debajo del zipper.
4. Suelte los clips para que cierren.

### Para remover:

1. Sostenga la brida con una mano entorno al área del clip.
2. Con la otra mano asegure la bolsa.
3. Coloque la brida hacia abajo y selle la bolsa de almacenamiento de leche de acuerdo a las instrucciones del fabricante de las bolsas.

*Nota: En caso de extracción doble, puede asegurar una brida a su cuerpo con el antebrazo mientras remueve la otra brida de su pecho con la misma mano. Repita los pasos del 1-3 para quitar las bolsas del adaptador Evenflo.*

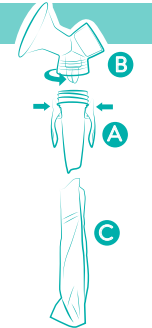

**ADVERTENCIA:** No utilice este producto si se encuentra roto, dañado o falta alguna de las piezas. Las pinzas son el punto de soporte para la fijación. Contiene pequeñas partes que suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantenga las partes y accesorios del extractor fuera del alcance de los niños. Estos son objetos de uso personal.