

AIR CANE™

Folding Cane

Canne Piante

Bastón Plegable

Instructions For
Use

Instructions
D'utilisation

Instrucciones De
Uso




Where Real Life Inspires Innovation

Designed with insight from real lives, elevated by next-generation engineering and innovative materials — because everyday support should feel extraordinary.

- The M+D by Drive® Team

Parts List

- ❶ Air Handle
- ❷ Snap Button
- ❸ Wrist Strap
- ❹ Anti-Rattle Collar
- ❺ Upper telescoping tube
- ❻ Lower collapsible tubes
- ❼ Air Tip

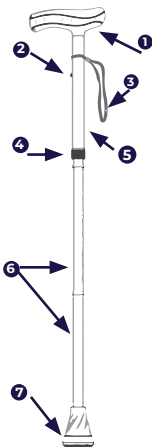

Tutorial Videos:

Scan QR code for link to tutorial videos.



WEIGHT CAPACITY: 350 LB / 159 KG

USER HEIGHT: 4'9" - 6'7" (1.44 m - 2.0 m)

Proper Cane Height




For a more comfortable fit, ensure your shoe height is the typical height of the shoes you wear most frequently when using cane.

- 1 Stand as upright as possible on a firm, flat surface and let your arm hang down naturally by your side.
- 2 Adjust your cane so that the top portion of the handle touches the inside of your wrist where it meets the palm of your hand.



Height Adjustment

- 1 The cane includes three folding sections that snap out automatically.
- 2 Turn the anti-rattle collar clockwise to loosen.
- 3 Depress the snap button.
- 4 Slide extension up or down until the snap button protrudes through the desired adjustment hole on the handle end of cane.

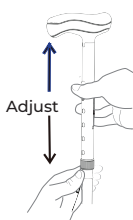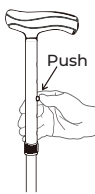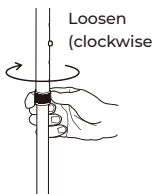


NOTE: An audible “CLICK” will be heard when the snap button securely protrudes through the adjustment hole.



Height Adjustment

- 5** Tighten the anti-rattle collar by turning it counterclockwise.
- 6** Repeat steps 2-5 until the cane is at the height determined as the proper cane height in the instruction manual.

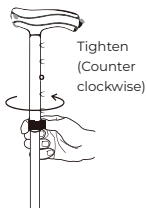

Cautions

- Use only after proper training under the direction of your doctor or physical therapist.
- Replace Cane Tips if they appear worn.
- Use extra caution on wet and slippery surfaces.


Safety Check

- With cane positioned per diagram, confirm that you can lean forward comfortably on the handle for weight support.
- The cane was not designed to bear a user's full weight. Improper use could lead to injury.
- Use extra caution on wet and slippery surfaces.
- If the handle or bottom base becomes loose, stop using cane immediately and contact customer service.

Safety Check




WARNING: Lifting handle while stepping on base may cause cane to separate and collapse.

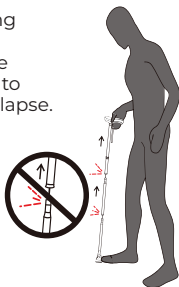

Keep Fingers Away and Do NOT Over Stretch



IMPORTANT: Be sure segments are securely joined and that push button is fully engaged.

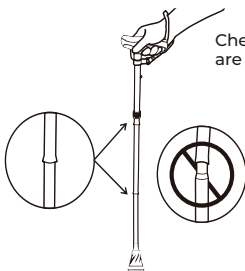

Check that Joints are Secure

Maintenance and Cleaning

Brush off dust and dirt or wipe with a damp cloth.

Ensure the snap button releases and re-engages properly.

Inspect cane tip for wear and damage.

Replace any broken, damaged or worn parts immediately.

Maintenance and Cleaning

M+D by Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more information.

Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



Air-Cane™ Accessories:

Replacement Air-Go Cane Tip MD10202BK
Scan QR code for link.

Patents: www.drivemedical.com/patents


Quand La Vraie Vie Inspire L'innovation

Conception inspirée de la vraie vie, amélioration grâce à une ingénierie de nouvelle génération et à des matériaux innovants — parce que l'aide au quotidien se doit d'être extraordinaire.

- Le M+D par l'équipe Drive®

Liste des pièces :

- ❶ Sangle de poignet
- ❷ Bouton-pression
- ❸ Poignée à air Wrist strap
- ❹ Molette de la Bague Anti-cliquetis
- ❺ Tube télescopique supérieur
- ❻ Tubes pliables inférieurs
- ❼ Embout à jet d'air

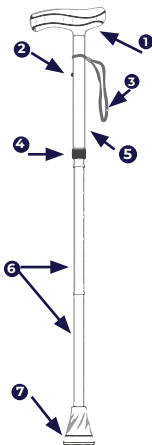

Vidéos tutoriels :

Balayez le code QR pour obtenir un lien vers les vidéos tutoriels.



POIDS MAXIMAL : 159 KG / 350 LB

TAILLE DE L'UTILISATEUR : 1,4 m à 2,0 m
(4 pi 9 po à 6 pi 7 po)

Hauteur de canne appropriée :




Pour un réglage plus confortable, s'assurer de porter une chaussure de la hauteur typique la plus fréquemment portée lors de l'utilisation de la canne.

- 1 Se tenir aussi droit que possible sur une surface ferme et plane, en laissant pendre le bras naturellement sur le côté.
- 2 Régler votre canne de sorte que la partie supérieure de la poignée touche l'intérieur de votre poignet au niveau du pli marquant le début de la paume de votre main.




Réglage de la hauteur :

- 1 La canne comprend trois sections pliantes qui se détachent automatiquement.
- 2 Tourner la molette de la bague anti-cliquetis dans le sens antihoraire pour la desserrer.
- 3 Appuyer sur le bouton-pression.
- 4 Faire glisser l'extension vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le bouton-pression sorte d'un trou de réglage souhaité dans l'extrémité de poignée de la canne.

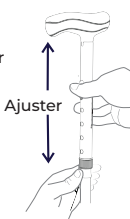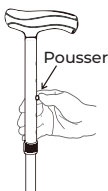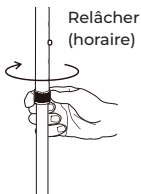


Réglage de la hauteur :

REMARQUE: Un « CLIC » sonore se fait entendre lorsque le bouton-pression est bien sorti du trou de réglage.

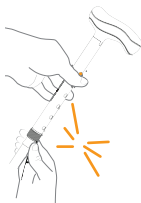

5 Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que la canne soit à la hauteur déterminée comme étant la hauteur de canne appropriée dans le manuel d'instructions.

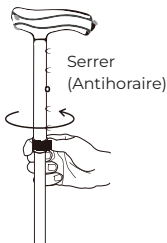

6 Serrer la molette de la bague anti-cliquetis en la tournant dans le sens horaire.

Mises En Garde

- À utiliser uniquement après une formation adéquate sous la direction de votre médecin ou de votre kinésithérapeute.
- Procéder au remplacement des embouts de la canne s'ils semblent usés.
- Faire preuve de prudence supplémentaire sur les surfaces humides et glissantes.

Vérification De La Sécurité

- Lorsque la canne est positionnée selon le diagramme, confirmer qu'il est possible de s'appuyer confortablement sur la poignée pour soutenir le poids.
- La canne n'a pas été conçue pour supporter le poids total de l'utilisateur. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
- S'assurer que le bouton-pression pour le réglage de la hauteur est fermement en place.
- Si la agarradera o la base inferior se aflojan, deje de usar el bastón inmediatamente y póngase en contacto con el servicio al cliente.

Entretien et nettoyage:

Enlever la poussière et la saleté en les brossant ou les essuyer avec un chiffon humide. S'assurer que le bouton-pression sort et s'insère bien dans le trou de réglage. Inspecter l'embout de la canne pour détecter toute usure et tout dommage. Remplacer immédiatement toute pièce cassée, endommagée ou usée.


M+D by Drive recommande à l'utilisateur de procéder à une inspection visuelle périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les parties et pièces sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés, et qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'obstacles à l'utilisation normale et sécuritaire. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site www.drivemedical.com/help pour obtenir de plus amples renseignements.

Mesures De Sécurité


⚠ Avertissement: Soulever la canne tout en posant le pied sur la base peut disjoindre les segments et désolidariser la canne.



Protégez vos doigts et ne tirez PAS plus que nécessaire.

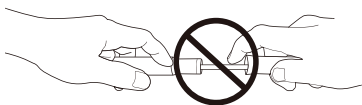

IMPORTANT : Assurez-vous que les segments sont bien joints et que le bouton à ressort est bien engagé.

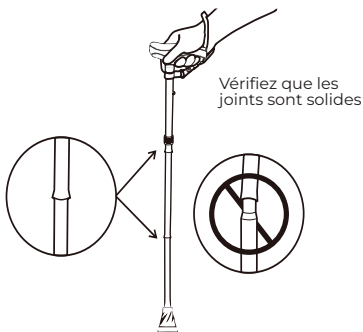

Garantie limitée à vie

Votre produit de marque M+D by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil MD by Drive ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive autorisé.



Accessoires Air-Cane™: Embout de rechange pour canne Air-Go, MD10202BK

Scannez le code QR pour le lien


Donde La Vida Real Inspira A La Innovación

Diseño acorde a perspectivas de vidas reales, elevado con tecnología de la próxima generación y materiales innovadores, porque el soporte diario debe sentirse extraordinario.

-El equipo de M+D by Drive®

Lista de piezas:

- ❶ Mango de aire
- ❷ Botón a presión
- ❸ Correa para muñeca
- ❹ La Perilla del Collarín Antirruído
- ❺ Tubo telescópico superior
- ❻ Tubos inferiores plegables
- ❼ Punta de aire

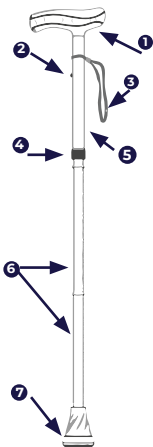

Videos tutoriales:

Escanee el código QR para obtener un enlace a videos tutoriales.

CAPACIDAD DE PESO : 350 LB / 159 KG
ALTURA DEL USUARIO : 1,44 m - 2,0 m
 (4'9" - 6'7") à 6 pi 7 po)

Altura adecuada del bastón:




Para un calce más cómodo, asegúrese de que la altura de sus zapatos sea la altura típica de los zapatos que usa con mayor frecuencia cuando usa el bastón.

- 1 Póngase de pie lo más erguido posible sobre una superficie firme y plana y deje que el brazo cuelgue naturalmente a un lado.
- 2 Ajuste su bastón de modo que la parte superior del mango toque el interior de la muñeca donde comienza la palma de la mano.



Ajuste de altura

- 1 El bastón incluye tres secciones plegables que se desprenden de forma automática.
- 2 Gire la perilla del collarín antirruido en sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojarla.
- 3 Pulse el botón a presión.
- 4 Deslice la extensión hacia arriba o hacia abajo hasta que el botón a presión sobresalga a través del orificio de ajuste deseado en el extremo del mango del bastón.

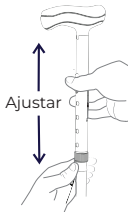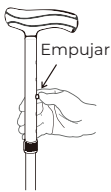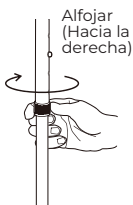


Ajuste de altura:

NOTA: Se escuchará un “CLIC” cuando el botón a presión sobresalga firmemente a través del orificio de ajuste. bouton-pression est bien sorti du trou de réglage.



- 5** Repita los pasos 2 a 3 hasta que el bastón esté a la altura determinada como la altura adecuada del bastón en el manual de instrucciones.

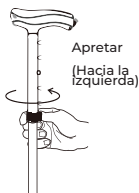

- 6** Ajuste la perilla del collarín de las agujas del reloj.

Precauciones

- Usarlo después de una capacitación adecuada bajo la dirección de su médico o fisioterapeuta.
- Reemplace las puntas del bastón si parecen estar desgastadas.
- Tenga mucho cuidado en las superficies húmedas y resbaladizas.

Verificación De Seguridad

- Con el bastón colocado según el diagrama, confirme que puede inclinarse cómodamente hacia adelante sobre el mango para soportar el peso.
- El bastón no está diseñado para soportar el peso total del usuario. El uso inadecuado podría provocar lesiones.
- Asegúrese de que el botón a presión para ajustar la altura esté firmemente en su lugar.

Verificación De Seguridad

- Si la agarradera o la base inferior se aflojan, deje de usar el bastón inmediatamente y póngase en contacto con el servicio al cliente.

Mantenimiento y limpieza:

Cepíllelo para sacar el polvo y la suciedad o límpielo con un paño húmedo.


Asegúrese de que el botón se suelte y vuelva a acoplar correctamente.

Inspeccione la punta del bastón para comprobar que no esté desgastada ni dañada. Sustituya inmediatamente cualquier pieza rota, dañada o desgastada.


M+D by Drive recomienda que el usuario realice inspecciones visuales periódicas de este producto para asegurarse de que todas las piezas y herrajes estén bien sujetos, que los componentes estén en buenas condiciones y no estén desgastados, rotos, rasgados, flojos ni oxidados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

Precauciones De Seguridad


ADVERTENCIA: Levantar la agarradera mientras se para sobre la base puede hacer que el bastón se separe y colapse.

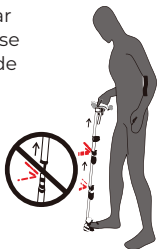

Mantener los dedos alejados y NO estirar de más.

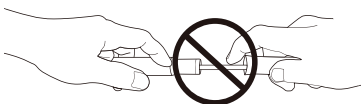

IMPORTANTE: Asegurarse de que los segmentos estén unidos de forma segura.

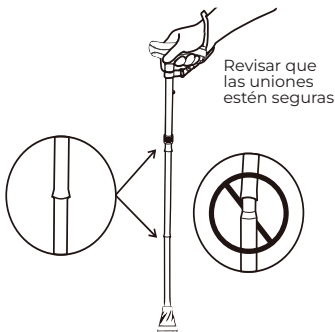

Garantía limitada de por vida

Su producto de la marca M+D by Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.

Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.


Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo MD by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.



Accesorios Air-Cane™: Punta de bastón Air-Go de repuesto, MD10202BK

Escanee el código QR para obtener el enlace



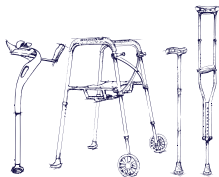

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
All rights reserved.
Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

2025 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom de
Drive DeVilbiss Healthcare.
Tous droits réservés.
Mobility Designed® est une marque déposée de Medical Depot,
Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis
Fabriqué en Chine

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
Todos los derechos reservados.
Mobility Designed® es una marca registrada de Medical
Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.
Hecho en China