

Otricare Baby Aspirator wegwerpdopjes (zacht neusdopje) voor pasgeborenen, baby's en kinderen

Bevat 10 zachte wegwerpdopjes met absorberende filter om te gebruiken met de OtriCare Baby Aspirator – Neusjesreiniger voor baby's. Neusjesreiniger (zacht neusdopje) apart verkrijgbaar.

Lees aandachtig de instructies op de verpakking van OtriCare Baby Aspirator (zacht neusdopje) alvorens dit product te gebruiken.

Het leegzuigen van de neus wordt aanbevolen bij elke verstopte neus van de baby, zo vaak als nodig en vooral vóór de maaltijd of slapengaan van de baby. OtriCare Baby Aspirator en Wegwerpdopjes (zacht neusdopje) zijn ontwikkeld om het neusje van de baby te reinigen door neusslijm op een zachte manier te verwijderen. De neusdopjes van zacht materiaal zijn ontwikkeld om zich aan te passen aan het neusje van de baby. Elk wegwerpdopje, individueel verpakt, bevat een absorberende filter om slijm te verzamelen, waardoor het proces volledig hygiënisch is. OtriCare Baby Wegwerpdopjes zijn eenvoudig, hygiënisch in gebruik in combinatie met OtriCare Baby Aspirator helpen uw baby normaal te ademen, slapen, eten en zich weer beter te voelen.

Voor wie is de OtriCare Baby Aspirator en Wegwerpdopjes geschikt? Dit product is bedoeld voor wie niet zelf de neus kan snuiten, zoals pasgeboren baby's, zuigelingen en kinderen. Voor gebruik bij een pasgeboren baby dient u eerst medisch advies in te winnen.

Wie moet de OtriCare Baby Aspirator en Wegwerpdopjes hanteren? Om veiligheidsredenen moet OtriCare Baby wegwerpdopjes worden gebruikt door de ouder of verzorger die de gebruiksaanwijzing kan lezen en begrijpen, mond, neus, oor en ogen kan onderscheiden en basisconcepten voor hygiëne kan begrijpen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.


Gebruik enkel OtriCare Baby Aspirator samen met OtriCare Baby Wegwerpdopjes. Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de materialen (zie samenstelling). Gebruik geen gebruikte of beschadigde neusdopjes of neusdopjes waarvan het filter ontbreekt of beschadigd is.

Voor hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, zijn de neusdopjes voor éénmalig gebruik. Na gebruik dienen de dopjes te worden weggegooid.

Vraag uw arts, apotheker of drogist indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product.

Elk ernstig incident met betrekking tot OtriCare Baby Wegwerpdopjes moet worden gemeld aan het lokale contact van de fabrikant en IGJ (NL), FAGG (BE).

Samenstelling: PVC en melamine schuim.

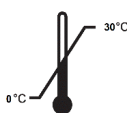Bewaring:  Bewaren tussen 0°C en 30°C.

Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gooi het product weg volgens de lokale voorschriften en houd altijd rekening met het milieu. Gooi de gebruikte neusdopjes bij het restafval en de kartonnen verpakking bij karton en papier.

Otricare Baby Aspirator embouts nasaux souples jetables pour nouveau-nés, bébés et enfants

Contient 10 embouts nasaux souples jetables équipés d'un filtre absorbant, à utiliser avec l'OtriCare Baby Aspirator - Nettoyant nasal pour bébés (vendu séparément).

Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l'emballage de l'OtriCare Baby Aspirator (embout nasal souple) avant d'utiliser ce produit.

Il est recommandé d'effectuer une aspiration nasale aussi souvent que nécessaire lorsqu'un bébé a le nez bouché, notamment avant de s'alimenter ou de dormir. L'aspirateur et les embouts nasaux jetables OtriCare Baby (embouts nasaux souples) ont été conçus pour le nettoyage en douceur du nez de votre bébé, en éliminant en douceur le mucus nasal. Les embouts nasaux souples ont été conçus pour s'adapter au nez de votre bébé.

Chaque embout nasal jetable sous emballage individuel est équipé d'un filtre absorbant pour collecter le mucus, afin que le processus soit totalement hygiénique.

Les embouts jetables OtriCare Baby sont simples et hygiéniques à utiliser avec votre OtriCare Baby Aspirator, afin que vous puissiez aider votre bébé à respirer, dormir et s'alimenter normalement, ainsi qu'à se sentir mieux à nouveau.

À qui sont destinés l'aspirateur et les embouts nasaux jetables OtriCare Baby ?

Le produit est notamment destiné aux nouveau-nés, nourrissons et enfants qui ne savent pas se moucher eux-mêmes. Demander un avis médical avant de l'utiliser chez un nouveau-né.

Qui doit utiliser l'aspirateur et les embouts nasaux jetables OtriCare Baby ?

Pour des raisons de sécurité, les embouts nasaux jetables OtriCare Baby doivent être utilisés par les parents ou les soignants capables de lire et de comprendre les instructions, de distinguer la bouche du nez, des oreilles et des yeux et de comprendre les notions d'hygiène de base.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Utiliser uniquement l'OtriCare Baby Aspirator avec les embouts nasaux jetables OtriCare Baby.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des matériaux utilisés (voir la composition).

Ne pas utiliser des embouts nasaux usagés ou endommagés ou dont le filtre est endommagé ou manquant.


Les embouts nasaux sont à usage unique, pour des raisons d'hygiène et pour éviter une contamination. Les embouts nasaux doivent être jetés après utilisation.

Pour toute question supplémentaire sur l'utilisation de ce produit, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien.

Tout incident grave en lien avec les embouts nasaux jetables OtriCare Baby doit être signalé au point de contact local du fabricant et à AFMPS.

Composition : PVC et mousse de mélamine.

Conservation :

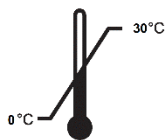

À conserver à une température comprise entre 0 °C et 30 °C. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

À conserver dans l'emballage d'origine. Jeter le produit conformément aux réglementations locales, en tenant toujours compte de l'environnement.

Jeter les embouts nasaux usagés dans la poubelle des ordures ménagères et l'emballage dans la poubelle des cartons et papiers.

Otricare Baby Aspirator Weicher Einwegspitzen für Neugeborene, Babys und Kinder

Enthält 10 weiche Einwegspitzen mit einem saugfähigen Filter, zur Anwendung bei einem OtriCare Baby Aspirator - Nasenreiniger für Babys (separat erhältlich).

Lesen Sie vor der Anwendung dieses Produktes die Anweisungen auf der Verpackung des OtriCare Baby Aspirators (weicher Spitzen).

Es wird empfohlen, eine Nasenaspiration vorzunehmen, wenn das Baby eine verstopfte Nase hat, und zwar so oft wie nötig und vor allem vor allem bevor Ihr Baby gefüttert wird oder schläft. OtriCare Baby Aspirator und Einwegspitzen (weicher Spitzen) wurden entwickelt, um die Nase Ihres Babys zu reinigen, indem sie sanft den Nasenschleim entfernen. Die weichen Spitze wurden entwickelt, um in die Nase Ihres Babys zu passen.

Jedem einzeln verpackten Einwegspitze liegt ein saugfähiger Filter bei, der den Schleim auffängt und so eine absolut hygienische Vorgangsweise gewährleistet.

OtriCare Baby Einwegspitzen sind einfach und hygienisch mit Ihrem OtriCare Baby Aspirator anzuwenden, sodass Sie Ihrem Baby helfen können, normal zu atmen, zu schlafen und zu essen und sich wieder besser zu fühlen.

Für wen sind der OtriCare Baby Aspirator und die Einwegspitze bestimmt?

Das Produkt ist für diejenigen bestimmt, die sich nicht selbst schnäuzen können, z. B. Neugeborene, Säuglinge und Kinder. Vor der Anwendung bei einem Neugeborenen sollte ein Arzt konsultiert werden.

Wer sollte den OtriCare Baby Aspirator und die Einwegspitze anwenden?

Aus Sicherheitsgründen sollten OtriCare Baby Einwegspitze von Eltern oder Betreuern verwendet werden, die die Anweisungen lesen und verstehen, zwischen Mund, Nase, Ohren und Augen unterscheiden und die die Grundkonzepte der Hygiene verstehen können.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

OtriCare Baby Aspirator ausschließlich mit OtriCare Baby Einwegspitzen verwenden.

Im Falle einer Überempfindlichkeit gegen einen der verwendeten Materialien nicht anwenden (siehe Zusammensetzung).

Gebrauchte oder beschädigte Spitze oder Spitze mit einem fehlenden oder beschädigten Filter nicht verwenden.


Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheitserregern sind die Spitze nur für den einmaligen Gebrauch. Die Spitze müssen nach Gebrauch entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Chemiker, wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Produktes haben.

Jedes schwerwiegende Ereignis im Zusammenhang mit OtriCare Baby Einwegspitze sollte der örtlichen Kontaktstelle des Herstellers und FAAG gemeldet werden.

Zusammensetzung: PVC und Melaminschaum.

Lagerung:

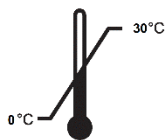

Zwischen 0 °C und 30 °C lagern. Nach dem auf der Verpackung spezifizierten Verfalldatum nicht mehr anwenden.

In der Originalverpackung aufbewahren. Das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und immer unter Berücksichtigung des Umweltschutzes entsorgen.

Entsorgen Sie die gebrauchten Spitze mit dem Hausmüll und den Umkarton mit dem Karton- und Papiermüll.



Gebruik geen gebroken of beschadigd product.

Ne pas utiliser si le produit est cassé ou endommagé.

Nicht anwenden, wenn sie zerbrochen oder beschädigt sind.



Voorzichtig: Lees aandachtig de instructies op de verpakking van OtriCare Baby Wegwerpdopjes en Aspirator alvorens dit product te gebruiken.

Attention : veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l'emballage des embouts nasaux jetables et de l'aspirateur OtriCare Baby avant d'utiliser ce produit.

Vorsicht: Lesen Sie vor der Anwendung dieses Produktes die Anweisungen auf der Verpackung der OtriCare Baby Einwegspitze und des Aspirators.



Eenmalig gebruik

À usage unique

Zum einmaligen Gebrauch



Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins Zwitterland/Suisse/Schweiz



Haleon Medical Devices,

Clocherane,
Youghal Road,
Dungarvan,

Co. Waterford,
X35 Y983,
Ireland

Contact/Kontaktstelle :

NL: mystory.nl@haleon.com

BE: mystory.be@haleon.com

NL: 0800 4090005

BE: 0800 81545



Datum/date: Juni/Juin 2023