



Hospital's
Choice®
TESTED
FOR CHILDREN

Nursery Care Deluxe Health and Grooming Kit IH452

Please be sure to read all warnings, instructions and notations before using this product. Please keep these instructions as they contain important information.

Quick Trip Diaper Bag, Changing Mat & Diaper Wipes Container

The Quick Trip Diaper Bag includes 3 compartments: two easy-view pockets and one on the bottom. Wipes case and changing mat can be stored easily in any of the three pockets.

To Clean: Wash with a damp cloth.



Bottle Medicine Dispenser

The Bottle Medicine Dispenser has easy-to-read dosage markings and measures up to 3 tsp. (15 ml).

To Use:

- 1 Remove top from measuring cup and fill cup to the prescribed dosage.
- 2 Snap top securely onto the measuring cup.
- 3 Bottle-feed child as normal, pausing as necessary so that child may swallow comfortably.

To Clean: Wash before first use and after every use. Disassemble top ring, nipple and measuring cup. Wash with warm, soapy water and rinse thoroughly. Alternatively, it is dishwasher safe. TOP RACK ONLY.

CAUTION: Inspect bottle nipple regularly for tears or cracks and discontinue use if any are noted. Made without BPA.

Easy Fill Medicine Syringe

Our Easy Fill Medicine Syringe is a convenient way to administer medicine to infants and toddlers. The curved, Soft Touch grip allows for comfortable finger positioning and easy dispensing.

To Use:

- 1 Insert syringe tip into medicine bottle and draw plunger back slowly until medicine reaches the prescribed dosage marking.
- 2 Hold baby upright and then insert the tip of the dispenser into your child's mouth. Point tip toward child's cheek.
- 3 Push plunger slowly to help release liquid.

To Clean: Wash all parts separately. Wash with warm, soapy water and rinse thoroughly. Repeat after administering each dosage.

CAUTION: Keep all medications out of child's reach. We recommend that you use a child resistant top to seal the medicine bottle and store it in a locked cabinet or other location that is not accessible to a child. Made without BPA.

Nasal Aspirator

To Use:

- 1 Place fingers as shown and thumb at bottom of aspirator (see photo), and squeeze air out of aspirator.
- 2 Hold baby upright and gently place tip into baby's nose so that it points partially up or down, but not directly toward the center of the nostril.
- 3 Slowly release pressure on the bulb and the suction will draw excess mucus from baby's nasal passage. Repeat in other nostril.

To Clean: Aspirator is top-rack dishwasher safe or can be washed in warm soapy water and rinsed. Clean thoroughly before first use and after each use. Make certain that all water is drained during drying. Avoid using abrasive pads or cleaners. **DO NOT** place in microwave.

WARNING: NEVER push the aspirator too far into the nostril and always wash and dry thoroughly after each use. **NEVER** use in baby's mouth or ears. When storing, keep away from heat and bright light.

! WARNING: Keep small parts away from children. These products are not toys. **DO NOT** allow children to play with them. When not in use, keep out of reach of children. **ALWAYS** supervise your child when using this kit. **NEVER** allow your child to use these products alone or without close adult supervision. We recommend that you store this kit in a locked cabinet or other location that is not accessible to a child. **FOR INDOOR HOME USE ONLY.**

Nail Clippers & 6 Emery Boards

These clippers have been specially designed for convenient adult use.

To use:

- 1 Lift arm from hand grip and rotate it 180°.
- 2 Position nail between cutting edges and squeeze handle to cut nail.
- 3 Emery board use is recommended to smooth any remaining sharp nails after clipping and also to smooth minor rough or jagged fingernail edges at other times.



To Clean: Wipe clippers with a damp cloth and dry after each use. Clippers may be sterilized by wiping with rubbing alcohol. **Note:** It is best to trim nails after a bath when they are soft, or while baby is sleeping.

CAUTION: Be careful not to trim too close to baby's sensitive skin.

Fingertip Toothbrush/Gum Massager

To Use:

- 1 Place on adult's fingertip.
- 2 Use the gum massager (nubby side) to help soothe baby's sensitive gums and the infant toothbrush side to clean emerging teeth and soothe tender gums.



Use and Care: Rinse thoroughly before first use and after each use.

WARNING: Do not allow children to play with this product. When not in use, keep out of reach of children. **ADULT SUPERVISION REQUIRED.**

Easy Grip Toddler Toothbrush

The contoured, ergonomic handle of the Toddler Toothbrush makes it easy for small hands to hold and is roll-resistant. Place it on the table or sink and the convenient, roll-resistant handle keeps it from falling off.



To Use:

- 1 Begin use once all primary teeth are in or when recommended by your dentist.
- 2 Apply a pea-sized amount of toothpaste to the brush and have your child brush for 2-3 minutes using an up and down motion.
- 3 Continue to help and supervise your child during brushing - do not allow child to swallow toothpaste.

NOTE: Toothbrushes should be replaced every 2-3 months.

To Clean: Rinse each brush thoroughly before first use and after each use.

Important Note: Questions about your child's oral health should be answered by your family dentist.

CAUTION: Adult supervision required. **DO NOT** allow child to run or walk while carrying or using toothbrush. **DO NOT** let children play with toothbrushes.



Brush & Comb Set

The Brush & Comb Set features large handles so parents and kids get a secure and comfortable grip. The hairbrush's soft bristles are extra gentle on baby's sensitive scalp while the comb's rigid teeth are perfect for getting through thicker hair.



To Clean: Wash in hot, soapy water. Rinse with warm clear water and let drip dry.

Cradle Cap Comb

Many babies develop the temporary dry skin condition called "Cradle Cap." The dry skin usually appears on the scalp. Use the Cradle Cap Comb to gently remove the loosened skin from baby's scalp. The teeth on this comb may also be great for gently combing a newborn baby's extra-fine hair.



To Clean: Wash in hot, soapy water. Rinse with warm clear water and let drip dry.

10 Alcohol Wipes

The Alcohol Wipes are provided to help keep thermometer clean and disinfected. Unwrap one alcohol swab from the packet and wipe thermometer clean after use, so that it is always ready to be used again. Discard swab after use.



FOR EXTERNAL USE ONLY.

Emergency Information Card

Record important phone numbers and medical information for quick reference.

3-in-1 Digital Thermometer

The Safety 1st Digital Thermometer takes a clear and accurate temperature without the worries of a glass/mercury device. Effective for oral, rectal or underarm use.



TH093

Fahrenheit / Celsius

While thermometer is off, press and hold the ON/OFF button until the unit of measure in the display screen switches. This will take approximately 5 seconds.

! WARNING: Before using digital thermometer, please read carefully. • This is **NOT** an ear thermometer. **NEVER** put probe into ear. • Take temperature measurements Underarm, Orally or Rectally. • **ALWAYS** supervise your child when using thermometer and thermometer covers. **NEVER** allow your child to use it alone or without close parental supervision. • **NEVER** allow children to play with this product. It is not a toy. This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision. • **DO NOT** expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock. Avoid sudden impact and dust. • Keep battery out of child's reach. Swallowing a battery could be fatal. Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode. • Used batteries should be disposed of properly. • **POTENTIAL CHOKING HAZARD.** Do not leave child unattended when a thermometer cover is in use. • Thermometer covers are not recommended for oral use. • Keep thermometer covers out of reach of children. • Thermometer covers are intended for single use only.

Technical Specifications

Measurement Range: 90° F to 109.9° F

Measurement Accuracy: +/- 0.2° F for temps below 96° F or above 107.6° F.

Operation Environment: 60.8° F to 104° F

Storage Environment: -13° F to 144° F

Test Protocol:

- 1 Put the tip of thermometer into water bath, approximately 2 cm below the surface.
- 2 Wait for 10 seconds, then turn on the thermometer by pressing the ON/OFF button. The thermometer is now in standard mode.
- 3 When the measurement is completed (approximately 60 seconds) record the temperature reading.

How to Measure Temperature

Ensure that thermometer is at room temperature, waiting 15 minutes if necessary.

- 188.8°F M**
- Press and release ON/OFF button. All segments display briefly as the thermometer powers on.
 - The last temperature measured displays with the **M** icon on screen for a few seconds. Then the thermometer will show an average temperature (37.0.9°C or 98.5.9°F) for 0.5 seconds before entering ready mode.
 - **Lo** displays and °F flashes when the thermometer is ready to take measurement.

Specifics for each Temperature Mode

ORAL—For children 4 years and older.



RECTAL—Highly accurate for measuring core body temperature. Pediatrician recommended mode from birth to age 1, and beyond as tolerated by child.



1. Ensure that °F is still flashing, then place probe tip under the tongue in locations indicated by ✓. Instruct children not to bite down on the probe.
2. Ensure that °F is still flashing, then insert thermometer tip gently into the rectum, taking care not to insert past the insertion gauge (ring on the probe tip). Do not force the tip into rectum if resistance is encountered.

• When °F stops flashing, the measuring is complete. Approximate measurement times are: 60 seconds for oral and rectal temps, 90 seconds or longer for underarm temp.

• Remove probe tip from measurement site. Read and record the temperature and time for reference.

• Press button to shut off or thermometer will shut off automatically after 8-9 minutes.

NOTE: High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Please contact your physician. Fever chart included. DO NOT allow child to walk or run during temperature taking. Probe could present a hazard.

Normal Body Temperature

Temperature readings are different from person to person and also vary depending upon the body location from which the temperature is measured. For example: Oral temperatures tend to be comparable to ear temperatures and approximately 1° lower than rectal temperatures for the same individual. Temperature readings are affected by many factors, including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.

"Normal" temperature refers to each individual's average temperature while healthy. You may want to measure and record your child's temperature a few times when he or she is well, so that you will know what is normal for your own child. On average, temperature ranges are as follows:

TEMPERATURE METHOD	NORMAL TEMPERATURE	FEVER RANGE
Oral	97.0° - 99.6°F	99.6°F +
Rectal	97.3° - 100.4°F	100.4°F +
Underarm	95.4° - 98.6°F	98.6°F +


How to Replace the Batteries

Dead Battery Indicator:

- When the **□** icon appears, the battery is exhausted and needs to be replaced.
- Battery is to be inserted with the correct polarity.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing battery.

Replace Battery:

- 1 Use a Phillips head screwdriver to loosen battery cover screw. Remove cover.
- 2 Use a toothpick to push the battery out of the metal housing.
- 3 Insert a new battery (LR41 or equivalent), correctly positioned with the positive "+" side facing up as shown in illustration.
- 4 Place the battery cover on the thermometer and secure the cover.

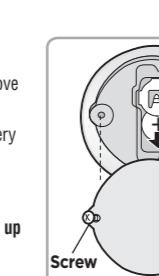

Care and Maintenance

Cleaning Probe Tip:

- Clean before and after each use.
- Use an alcohol swab to wipe clean.

Cleaning Thermometer Body:

- Use a soft, dry cloth to clean thermometer body.

Notes:

- DO remove battery if stored for a long period of time.
- DO store thermometer in a dry place at room temperature with the protective cap in place.
- DO take special care not to scratch the display window.
- DO NOT allow electronics to get wet.
- DO NOT use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning.
- DO NOT drop thermometer.
- Install new battery and retry function before calling Consumer Relations on electronics.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.


© 2017 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com Styles and colors may vary. Made in CHINA

Por favor, asegúrese de leer bien todas las advertencias, instrucciones e indicaciones antes de usar este producto. Siga las instrucciones, ya que contienen información importante.

Kit de lujo para salud y aseo para niños IH452

Útil bolso de viaje para pañales, cambiador y contenedor de toallitas húmedas

El útil bolso de viaje para pañales tiene tres compartimentos: dos con fáciles de ver bolsillos, y un compartimiento inferior. El contenedor de toallitas húmedas y el cambiador se pueden almacenar fácilmente en cualquiera de los tres bolsillos.

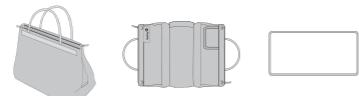

Para limpiar: Límpielo con un paño húmedo.

Biberón dosificador de remedios

El dosificador de la botella de medicina tiene marcas de dosificación fáciles de leer y puede medir hasta cucharaditas. (15 ml).

- 1 Retire la tapa del vaso medidor y llene el vaso hasta la dosis indicada.
- 2 Coloque correctamente la tapa en el vaso medidor.
- 3 Dé el biberón a su hijo de manera normal, haciendo pausas para que el niño pueda tragar cómodamente.

Para limpiar: Lávelo antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso. Desarme el aro superior, la tetilla y el vaso medidor. Lávelos con agua jabonosa tibia y enjuáguelos completamente. Alternativamente, puede lavarlos en un lavavajillas, SÓLO EN LA CANASTA SUPERIOR.

PRECAUCIÓN: Inspeccione la tetilla del biberón regularmente para identificar roturas y fisuras, e interrumpa su uso si presenta alguna falla. Hecho sin BPA.

Jeringa para medicinas de llenado fácil

Nuestra jeringa para medicinas de llenado fácil ofrece una manera conveniente de administrar medicinas a bebés y niños pequeños. El mango curvo y blando permite colocar los dedos cómodamente y dosificar fácilmente la medicina.

- 1 Inserte la punta de la jeringa en la botella de medicina y tire el émbolo hacia atrás lentamente hasta que la medicina alcance la marca de la dosis prescrita.
- 2 Sostenga al bebé en posición erguida y coloque la punta del dosificador en la boca del niño. Oriente la punta hacia la mejilla del niño.
- 3 Presione el émbolo suavemente para ayudar a liberar líquido.

Para limpiar: Lave todas las piezas por separado. Lave en agua jabonosa templada y enjuague completamente. Repita luego de suministrar cada dosis.

PRECAUCIÓN: Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

Recomendamos utilizar una tapa a prueba de niños para sellar el envase de la medicina y guardarlo en un armario con traba o en otro sitio inaccesible a los niños. Hecho sin BPA.

Aspirador nasal

Para utilizar:

- 1 Coloque los dedos como se muestra y apoye el pulgar en la parte inferior del aspirador (vea la foto). Apriete el aspirador para eliminar el aire en su interior.
- 2 Sostenga al bebé en posición erguida y coloque suavemente la punta dentro de la nariz, de modo que apunte parcialmente hacia arriba o hacia abajo, pero no directamente hacia el centro de la fosa nasal.
- 3 Presione la pera y libere suavemente la presión. La succión retirará el exceso de mucosidad de la fosa nasal del bebé. Repita en el otro orificio nasal.

Para limpiar: Aspirador es apto para lavavajillas top-rack o se puede lavar en agua tibia y jabón y enjuagar. Enjuagar en agua caliente con jabón antes del primer uso y después de cada uso. Permitir que se seque completamente asergurándose que todo el agua antes de usar de nuevo. NO lo seque en un horno de microondas.

PRECAUCIÓN: NUNCA presione demasiado el aspirador en la fosa nasal y siempre lavar y secar bien después de cada uso. No lo utilice **NUNCA** en la boca o en el oído del bebé. guárdealo en un lugar alejado del calor y la luz brillante.

AVISO: Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Estos productos no son juguetes. **NO** permita que los niños jueguen con ellos. Cuando no los utilice, manténgalos fuera del alcance de los niños. **SIEMPRE** supervise a su hijo cuando se utiliza este kit. **NUNCA** permita que su hijo use estos productos solos o sin supervisión de un adulto. Le recomendamos que almacene este kit en un armario cerrado con llave o en otro lugar que no es accesible a un niño. **SÓLO PARA USO EXTERNO.**

Tarjeta de información en caso de emergencia

Permita anotar números de teléfono e información médica importante para referencia ápida.

Cortaúñas con 6 limas

Estos cortaúñas fueron especialmente diseñados para una cómoda utilización adulto.

Para usar:

- 1 Levante el brazo de la empuñadura y gírelo 180°.
- 2 Coloque la uña entre los bordes de corte y presione el brazo para cortar la uña.
- 3 Se recomienda utilizar las limas para alisar los bordes de las uñas después de cortarlas, así como para alisar bordes ásperos o dentados en cualquier otro momento.



Para limpiar: Limpie el cortaúñas con un paño húmedo y seque después de cada uso. El cortaúñas puede esterilizarse frotándolo con alcohol desinfectante.

Nota: Recomendamos cortar las uñas luego del baño, ya que estarán blandas, o bien por la noche, cuando el bebé esté durmiendo.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no recortar las uñas muy cerca de la piel sensible del bebé.

Estimulador de encías para dedos

Para utilizar:

- 1 Coloque el estimulador de encías en la punta del dedo de un adulto.
- 2 Utilice el estimulador de encías (lado con protuberancias) para ayudar a aliviar y masajear las encías sensibles del bebé, y el lado del cepillo de dientes pequeño para limpiar dientes emergentes y calmar encías sensibles.



Uso y cuidado: Enjuáguelo completamente antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso.

AVISO: No permita que los niños jueguen con este producto. Cuando no lo utilice, manténgalo fuera del alcance de los niños. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

Cepillo de dientes para niños de fácil agarre

El mango ergonómico y contorneado del cepillo de dientes para niños permite que las manos pequeñas lo sujeten más fácilmente. Colóquelo sobre la mesa o lavabo y el conveniente mango estabilizador evita que el cepillo ruede y se caiga.



Para utilizar:

- 1 Comience a usarlo cuando al niño tenga todos los dientes de leche o lo recomiende su dentista.
- 2 Coloque una pequeña cantidad de pasta dentífrica en el cepillo y deje que el niño se cepille los dientes durante 2 o 3 minutos con movimientos ascendentes y descendentes.
- 3 Ayude y supervise al niño mientras se cepilla los dientes; no permita que trague pasta dentífrica.

NOTA: Los cepillos de dientes deberían cambiarse cada 2 o 3 meses.

Para limpiar: Enjuague bien el cepillo antes de usarlo por primera vez y después de cada uso.

Nota importante: El dentista de su familia es quien debe responder las preguntas sobre la salud dental de su hijo.

PRECAUCIÓN: Se requiere la supervisión de un adulto. **NO** permita que el niño camine o corra mientras utiliza el cepillo de dientes. **NO** deje que los niños jueguen con los cepillos de dientes.

Juego de cepillo y peine

El cepillo y el peine poseen mangos grandes para que tanto los padres como sus niños puedan sujetarlos con más seguridad y comodidad. Las cerdas suaves del cepillo son extremadamente delicadas con el sensible cuero cabelludo del bebé, y los dientes rígidos del peine son perfectos para los cabellos más gruesos.



Para limpiar: Lávelo en agua jabonosa caliente. Enjuáguelo con agua tibia y limpia y déjelo secar.

Peine para costra láctea

Muchos bebés desarrollan una dermatitis temporal seca llamada "costra láctea". La piel seca suele aparecer en el cuero cabelludo. Utilice el peine para costra láctea para retirar suavemente la piel seca del cuero cabelludo del bebé. Los dientes de este peine también son ideales para peinar con suavidad el pelo fino del bebé recién nacido.



Para limpiar: Lávelo en agua jabonosa caliente. Enjuáguelo con agua tibia y limpia, y déjelo secar.

10 toallitas de alcohol

Las toallitas de alcohol se proveen para ayudar a mantener el termómetro limpio y desinfectado. Tome un paño embebido en alcohol del paquete y límpie el termómetro después del uso para que quede listo para ser utilizado nuevamente. Deseche el paño después de utilizarlo.



Tarjeta de información en caso de emergencia

Permita anotar números de teléfono e información médica importante para referencia ápida.

Termómetro digital 3 en 1

El termómetro digital Safety 1st es muy claro y preciso a la hora de tomar la temperatura sin tener que preocuparse por aquellos dispositivos de vidrio/mercurio. Es efectivo para los métodos oral, rectal o debajo del brazo.



TH093

Fahrenheit / Centígrado

Con el termómetro apagado, presione y mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que la unidad de medida que aparece en pantalla cambie. Esto tarda aproximadamente 5 segundos.

AVISO: Lea atentamente antes de utilizar el termómetro digital. • Este **NO** es un termómetro de oído. • **NUNCA** coloque la sonda en el oído. • Mida la temperatura debajo del brazo, por vía oral o rectal. • **SIEMPRE** supervise a los niños cuando use un termómetro y una funda de termómetro. • **NUNCA** permita que un niño lo use por sí solo o sin supervisión de los padres. • **NUNCA** permita que los niños jueguen con este producto. No es un juguete. Es un dispositivo electrónico delicado que puede dañarse si no se usa de la manera apropiada bajo la supervisión de los padres. • **NO** exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz directa del sol. Evite los golpes bruscos y el polvo. • Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede resultar fatal. • La batería no debe volver a cargarse ni exponerse a temperaturas muy altas, ya que podría explotar. • Las baterías usadas se deben desechar correctamente. • **POSIBLE RIESGO DE ASFIXIA.** Nunca deje a un niño solo cuando utilice una funda de termómetro. • Las fundas de termómetro están diseñadas para ser usadas una sola vez.

Especificaciones Técnicas

Rango de medición: 32.0 °C a 43.9 °C

Precisión de medición: +/- 0.1° C para temps

menores a 35.5 °C o mayores a 42 °C.

Ambiente de operación: 16° C a 40° C

Ambiente de almacenamiento: -25° C a 62.2° C

Protocolo de prueba:

1 Coloque la punta del termómetro en el agua para el baño, aproximadamente 2 cm debajo de la superficie.

2 Espere 10 segundos, luego encienda el termómetro presionando el botón ON/OFF. El termómetro se encuentra en modo estándar.

3 Una vez que termina de tomar la temperatura (aproximately 60 seconds), registre la lectura.

Cómo Tomar la Temperatura

Asegúrese de que el termómetro esté a la temperatura ambiente. Si es necesario, espere 15 minutos.

188.8 °C M

36.8 °C

L

- Presione y libere el botón ON/OFF. Todos los segmentos aparecen en pantalla durante 1 segundo.
- Durante unos segundos, aparece en pantalla la última temperatura tomada con el icono M. El termómetro mostrará la temperatura media (37.0.9°C o 98.5.9°F) durante 0,5 segundos antes de pasar al modo listo.
- Lo aparece en pantalla y °C comienza a brillar intermitentemente cuando el termómetro está listo para tomar la temperatura.

Detalles para cada Modo de tomar

ORAL—Para niños de 4 años de edad en adelante.



1. Asegúrese de que intermitentemente, luego coloque la punta de la sonda debajo de la lengua en las ubicaciones marcadas por ✓. Indique al niño que no muerda la sonda.

• Cuando °C deja de brillar intermitentemente, significa que el termómetro ya registró la temperatura. Los tiempos aproximados son: 60 segundos para los modos oral y rectal y 90

segundos como mínimo para el modo debajo del brazo.

• Quite la punta de la sonda y verifique la temperatura.

• Presione el botón para apagarlo o el termómetro se apagará automáticamente después de 8-9 minutos sin usar.

NOTA: Fiebre alta y prolongada requiere atención médica, en especial cuando se trata de niños pequeños. No deje de consultar a un médico. Tabla de medición incluida.

NO permita que el niño camine o corra mientras le toma la temperatura. La sonda podría presentar un riesgo.

Temperatura Corporal Normal

Las mediciones de temperatura varían de persona a persona y también varían según la parte del cuerpo en la cual se tome la temperatura. Por ejemplo: Las temperaturas orales tienden a ser comparable a la temperatura del oído, y aproximadamente 0.5 °C menos que las temperaturas rectales para una misma persona. Las lecturas de temperatura también pueden verse afectadas por otros factores, tales como el ejercicio, el consumo de alimentos o bebidas calientes o frías antes de tomar la temperatura, y la técnica de medición.

La temperatura "normal" se refiere a la temperatura media de cada persona en buen estado de salud. Tal vez le convenga tomar y anotar la temperatura de su hijo cuando esté en buen estado de salud unas cuantas veces, para saber cuál es su temperatura normal. En promedio, los límites de temperatura son los siguientes:

MÉTODO	LÍMITES NORMALES	LÍMITES DE FIEBRE
Oral	36.1° - 37.6°C	37.6°C+
Rectal	36.3° - 38°C	38°C+
Debajo del brazo	35.2° - 37°C	37°C+

Garantía Limitada Durante un (1) Año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Termómetro), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra defectiva durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presenta materiales defectuosos o mano de obra defectiva, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costos relacionados con el envío y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de