


One-Way Nasal Aspirator

User's Guide IH198

Thank you for purchasing this Advanced Solutions™ product. We're proud to be your choice to help you keep your child healthy and safe. Please read these instructions completely before using this product.

1st To Use

1. Hold baby upright and grasp aspirator as shown (Figure A). Gently place aspirator tip in nostril, angled so that it does not point directly toward center of nostril.
2. Keeping tip in the nostril, pump with thumb on bottom of bulb (6+ times in rapid succession) to create suction. Air flows into tip and out vent (Figure C), while mucus collects just inside the tip.
3. When aspiration is complete, remove tip from nostril. Repeat in other nostril.
4. Clean aspirator after use.

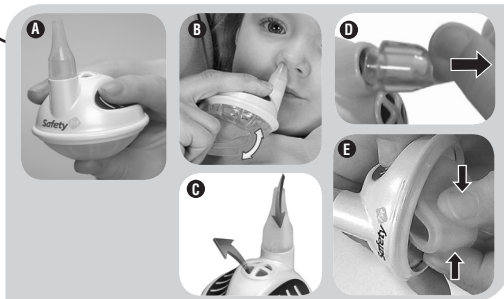

CAUTION: NEVER push the aspirator too far into the nostril. Wash and dry thoroughly before first use and after each use. NEVER use in baby's mouth or ears. When storing, keep away from heat and bright light. This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

1st To Clean

1. Separate bulb into three parts: top of bulb, bottom of bulb and silicone tip (Figures D and E). **DO NOT** attempt to remove valves.
2. Wash all parts in warm soapy water and rinse thoroughly. Run warm water through the valves in the same direction as air flow (arrows in Figure C). Avoid using abrasive pads or cleansers.
3. Sterilize silicone tip (optional): Microwave 90 seconds on high. Tip will be hot. Allow to cool completely before touching or using it. **DO NOT** put other aspirator parts in microwave.
4. Air dry, then be sure to install tip completely during reassembly.


Aspirador nasal de una sola vía

Guía para el usuario IH198

Gracias por comprar este producto Advanced Solutions™. Es un orgullo estar dentro de su elección para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de su hijo. Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

1st Para usar

1. Sostenga al bebé en posición erguida y tome el aspirador como se muestra en la imagen (Figura A). Con cuidado, coloque la punta del aspirador en la fosa nasal, en forma torcida para que no apunte directamente hacia el centro de la fosa nasal.
2. Coloque la punta del aspirador en la fosa nasal y bombee con el pulgar sobre la parte inferior del aspirador (6+ veces en una secuencia rápida) para lograr la succión. El aire ingresa y sale del aspirador (Figura C), y la mucosa queda retenida en la punta.
3. Cuando aspiración es completa, quita la punta del aspirador de fosa nasal. Repita el procedimiento con la otra fosa nasal.
4. Limpie el aspirador después de usarlo.

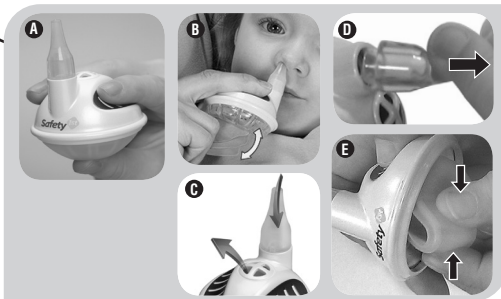

PRECAUCIÓN: **NUNCA** empuje el aspirador demasiado adentro de la fosa nasal. Lave y seque bien antes de usarlo por primera vez y después de cada uso. **NUNCA** lo utilice en la boca o las orejas del bebé. Cuando lo guarde, manténgalo alejado del calor y la luz directa. Este producto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen con él.

1st Para limpiar

1. Separe el aspirador en tres partes: parte superior, parte inferior y punta de silicona (Figuras D y E). **NO** intente quitar las válvulas.
2. Lave todas las partes con agua tibia y jabonosa y seque bien. Deje que el agua corra a través de las válvulas en la misma dirección que corre el aire (flechas en Figura C). Evite usar materiales o productos de limpieza abrasivos.
3. Esterilice la punta de silicona (opcional): Colóquela en un microondas durante 90 segundos a temperatura alta. La punta se calentará. Deje que se enfríe bien antes de tocarla y volver a usarla. **NO** coloque otras partes del aspirador en el microondas.
4. Deje secar al aire libre y después asegúrese de instalar la punta correctamente cuando vuelva a armarlo.