

1st Healthcare Kit

IH020, IH173, IH210, IH217, IH224, IH231, IH246, IH247, IH342


CAUTION:

THESE PRODUCTS ARE NOT TOYS. Do not allow children to play with them. Products should only be used with adult supervision. When not in use, keep out of reach of children.

FOR INDOOR HOME USE ONLY.

Reversible Case

The reversible case keeps all of baby's grooming items in one convenient place. In the cube shape, this case has its greatest capacity for bulky items. Reversed into the flat, pencil-case shape, it still holds all of the kit components but fits more compactly into a purse, diaper bag, or suitcase.

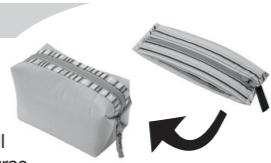

To reverse from cube to pencil case: Turn unzipped case inside-out and gently pull on ends to straighten and flatten the case. Bring zipper pull to the outside of the case.

To reverse from pencil case to cube: Turn unzipped case inside-out and gently re-shape ends to "square off" and form the ends of the cube. Bring zipper pull to the outside of the case.

Use and Care: Spot clean. Wipe with a damp cloth.

Medicine Dropper



Our Medicine Dropper is specially designed to provide accurate dosage readings. The convenient spill guard plug helps reduce messy spills at home or away. Made without BPA.

To Use:

- 1 Remove spill guard from dropper tip and squeeze air out of dropper.
- 2 Insert dropper into the medicine bottle and slowly release pressure on the bulb until the medicine reaches the desired dosage marking.
- 3 Remove dropper from the medicine bottle and tip upside down while securing the spill guard over the dropper tip.
- 4 Administer medicine while child is in an upright sitting position. Remove spill guard and point tip of dropper to the inside of baby's cheek and gently squeeze the bulb.
- 5 Administer medicine slowly enough so your child may swallow comfortably. Pause and continue if necessary.

To Clean:

Wash with warm, soapy water before first use and after each use. Rinse thoroughly.

CAUTION: KEEP ALL MEDICATIONS OUT OF CHILD'S REACH. WE RECOMMEND THAT YOU USE A CHILD RESISTANT TOP TO SEAL THE MEDICINE BOTTLE AND STORE IT IN A LOCKED CABINET OR OTHER LOCATION THAT IS NOT ACCESSIBLE TO A CHILD.

Newborn Nasal Aspirator

Our Newborn Nasal Aspirator quickly and conveniently removes excess mucus so your baby can breathe comfortably again. Made without BPA.

- 1 Place fingers as shown and thumb at bottom of aspirator (see photo), and squeeze air out of aspirator.
- 2 Hold baby upright and gently place tip into baby's nose so that it points partially up or down, but not directly toward the center of the nostril.
- 3 Slowly release pressure on the bulb and the suction will draw excess mucus from baby's nasal passage. Repeat in other nostril.



To Clean:

Clean before first use and after each use. Gently squeeze air from aspirator. Rinse the bulb in warm, soapy water. Squeeze and release bulb several times to thoroughly wash interior of aspirator. Rinse in the same fashion with warm, clean water. Make certain that all of the water is drained during drying. DO NOT place in microwave.

CAUTION: NEVER PUSH THE ASPIRATOR TOO FAR INTO THE NOSTRIL AND ALWAYS DRY THOROUGHLY AFTER EACH USE. NEVER USE IN BABY'S MOUTH OR EARS. WHEN STORING, KEEP AWAY FROM HEAT AND BRIGHT LIGHT.

Soft Grip Toothbrush



The contoured, soft-grip handle makes it easy for small hands to grip the toothbrush. Its soft, fine bristles are especially gentle on your toddler's sensitive teeth and gums. Place it on the table or sink and the convenient, roll-resistant handle keeps it from falling off.

Your child may begin to use the toothbrush once all primary teeth are in or when recommended by your dentist. With a pea-sized amount of toothpaste, let your child brush for 2-3 minutes using an up and down motion. Continue to help and supervise your child during brushing—do not allow child to swallow toothpaste. **NOTE:** Toothbrushes should be replaced every 2-3 months. Made without BPA.

To Clean:

Rinse brush thoroughly before first use and after each use.

Important Note: Questions about your child's oral health should be answered by your family dentist.

CAUTION: DO NOT ALLOW CHILD TO RUN OR WALK WHILE CARRYING OR USING TOOTHBRUSH. DO NOT LET CHILDREN PLAY WITH TOOTHBRUSHES.

5 Alcohol Wipes



The Alcohol Wipes are provided to help keep thermometer clean and disinfected. Unwrap one alcohol swab from the packet and wipe thermometer clean after use so that it is always ready to be used again. Discard swab after use.

FOR EXTERNAL USE ONLY.

Emergency Information Card

Record important phone numbers and medical information for quick reference.

Digital Thermometer with Case

The Safety 1st Digital Thermometer takes a clear and accurate temperature. Effective for oral, rectal, or underarm use. **NOTE:** Fahrenheit only (except for IH246 & IH247, which contain Celsius-only thermometers).



©2024 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles, colors, and labeling may vary. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 03/24 4358-5237E



WARNING:

BEFORE USING DIGITAL THERMOMETER, PLEASE READ CAREFULLY.

- This is **NOT** an ear thermometer. **NEVER** put probe in ear. Take temperature measurements Underarm, Orally or Rectally.
- This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision.
- **NEVER** allow your child to use it alone or without close parental supervision.
- **DO NOT** expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight, or shock.
- Avoid sudden impact and dust.
- Keep battery out of child's reach. Swallowing battery could be fatal. Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.

BEFORE USING THE DIGITAL THERMOMETER, PLEASE READ CAREFULLY:

- Do not chew on or bend the thermometer.
- Make sure the thermometer has been at room temperature for 15 minutes before use.

Important Information:

- High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.
- Do not allow children to take their temperatures unattended.
- Read the enclosed instructions carefully to ensure accurate temperature readings. Temperature readings and measurement times are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.
- Do not allow children to walk or run during temperature taking. The probe could present a hazard.

How To Care For This Product:

- Use isopropyl alcohol or soap and water to clean thermometer tip and probe after each use.
- Thermometer is water-resistant (not waterproof) for easy cleaning.
- Store the unit in the protective case while not in use.
- Do not store or keep in direct sunlight, or in high-temperature areas.
- Do not drop the thermometer as this may ruin the unit.

What Is A Normal Temperature?

Temperature readings vary in different individuals and also vary based on the body location where the temperature is measured. A rectal temperature tends to be approximately 1° higher than an oral temperature and 2° higher than an underarm temperature for the same individual.

"Normal" temperature refers to each individual's average temperature while they are well. You may want to measure and record your baby's temperature a few times when they are well, so that you'll have a baseline of what is normal for your own child. On average, temperature ranges are as follows:

| Temperature Method | Normal Range | Fever Range |
|--------------------|----------------|-------------|
| Rectal: | 98° to 100.3°F | 100.4°F + |
| Oral: | 97° to 99.5°F | 99.6°F + |
| Underarm: | 96° to 98.5°F | 98.6°F + |

How To Take Temperature:

- 1 Select rectal, oral, or underarm as your measurement site based on the individual requiring a temperature measurement.
- 2 Push the on-off button located on the cap. The thermometer display will read: "188.8 °F". This is a function check indicating the unit is working properly. The thermometer ▼ will read L°F and begin measuring temperature when exposed to body heat.
- 3 The °F symbol will continuously flash until completion of the temperature-taking process. Please note that the "▼" indicates a low battery. An "ERR" message in the window indicates your unit is not functioning properly. Do not expect an accurate temperature reading if the low battery indicator is present.
- 4 When peak temperature is reached, the °F symbol will stop flashing.
- 5 Read and record the temperature and time for reference.
- 6 Push the on/off button to turn the unit off. If you do not turn the unit off, it will shut off automatically in approximately 10 minutes.
- 7 Clean the thermometer tip and probe as recommended.

Rectal Use: (For babies and young children)

- Lubricate the probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly.
- Gently insert the probe tip no more than 1/2 inch or 1.3 cm into the rectum. Do not force the tip into the rectum if resistance is encountered.
- Peak temperature should be reached in approximately 60 seconds.
- To purchase thermometer covers (optional), call Consumer Care at (800) 544-1108, and ask for part number 49520.




Oral Use: (For children 4 years and older)

- Do not drink hot or cold fluids, exercise or perform other activities that will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature. The mouth should remain closed up to 5 minutes before attempting a reading.
- Place the probe tip well under the tongue.
- Instruct children not to bite down on the probe.
- The peak temperature should be reached in approximately 60 seconds. Opening the mouth could result in a longer time for a reading.

Underarm (Axillary) Use: (For child who will not cooperate for oral or rectal temp)

- Wipe underarm with a dry towel.
- Place probe tip in armpit and bring arm down against the body. The thermometer should be pointing in the same direction as your body if possible.
- The time required for an accurate underarm temperature may be 90 seconds or longer depending on placement of the probe and closure of the arm against the body.

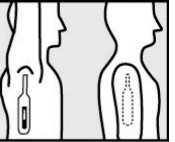

Battery Information:

- Long life, replaceable, mercury-free battery (approximately 6000 temperatures).
- Automatic switch off after approximately 10 minutes for longer battery life.
- Low battery indicator "▼" appears in the lower right of the display when the battery is exhausted.

Important Battery Information:

- Keep these instructions as they contain important information.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.

Battery type: 1X LR41 (included)


Recycle or dispose of batteries safely according to federal, state, and local laws.

CAUTION:

TO AVOID BATTERY LEAKAGE • Always follow the instructions carefully. Use only specified batteries. Make sure to insert batteries with the correct polarity. • Remove exhausted batteries from the product. • Do not short-circuit the supply terminals. • Remove batteries when stored for long periods of non-use. • **RECHARGEABLE BATTERIES:** Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not recharge non-rechargeable batteries.

Measurement Range: 89.6°F to 111.2°F.

Measurement Accuracy: 0.2°F between 93.2°F to 107.6°F at an ambient temperature of 64.4°F to 82.4°F.

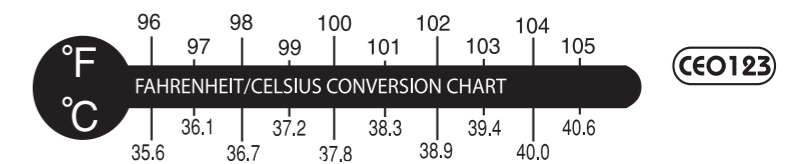

One-Year Limited Warranty for Digital Thermometer

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Digital Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Care Department at the address noted on the opposite page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.



Kit 1st para el cuidado de la salud

IH020, IH173, IH210, IH217, IH224, IH231, IH246, IH247, IH342

PRECAUCIÓN:

ESTOS PRODUCTOS NO SON JUGUETES. No permita que los niños jueguen con ellos. Los productos sólo deben utilizarse con la supervisión de un adulto. Cuando no los utilice, manténgalos fuera del alcance de los niños.

SÓLO PARA UTILIZAR EN EL HOGAR PARA INTERIOR.

Estuche reversible

El estuche reversible mantiene todos los artículos para el aseo del bebé en un lugar conveniente. En su forma de cubo, este estuche tiene su mayor capacidad para artículos voluminosos. Invertido, en su forma chata de portalápices, también guarda todos los componentes del kit pero cabe de manera más compacta en bolsos, bolsas para pañales y maletas.

abierto de adentro hacia afuera y tire suavemente de los extremos para enderezarlo y aplanarlo. Coloque el tirador de cremallera en el lado externo del estuche.

Para invertir de forma de portalápices a forma de cubo: Dé vuelta el estuche abierto de adentro hacia afuera y suavemente dé forma a los extremos para “cuadrar” y moldear los extremos del cubo. Coloque el tirador de cremallera en el lado externo del estuche.

Uso y Cuidado: Limpie por partes. Frote con un paño húmedo.

Cuentagotas de Medicina

Nuestro Cuentagotas para Medicina está especialmente diseñado para proveer medidas precisas de dosificación y la tapa conveniente protectora contra derrames ayuda a reducir los accidentes de derrames en la casa o cuando viaja. Fabricado sin BPA.

Uso y cuidado:

- 1 Remover la tapa protectora contra derrames de la punta del cuentagotas y presionar todo el aire afuera del cuentagotas.
- 2 Insertar el cuentagotas en la botella de la medicina y soltar la presión del bombillo despacio hasta que la medicina llegue a la marca de la medida de dosificación deseada.
- 3 Remover el cuentagotas de la botella de medicina y darle vuelta al revés mientras coloca el protector contra derrames sobre la punta del cuentagotas.
- 4 Administrar la medicina mientras su niño está sentado en posición recta. Remover el protector contra derrames y dirigir la púnta del cuentagotas en la parte de adentro del cachete y lentamente apetar el bombillo.
- 5 Administre la medicina lentamente, para que el bebé pueda tragarla con comodidad. Si fuera necesario, haga una pausa y continúe la administración.

Para Limpiar:

Lavar con agua caliente y jabón y enjuagar bien antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso. Enjuague completamente.

PRECAUCIÓN: MANTENGA TODAS LAS MEDICINAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. RECOMENDAMOS UTILIZAR UNA TAPA A PRUEBA DE NIÑOS PARA SELLAR EL ENVASE DE LA MEDICINA Y GUARDARLO EN UN ARMARIO CON TRABA O EN OTRO SITIO INACCESIBLE A LOS NIÑOS.

Aspirador nasal para recién nacidos

Nuestro aspirador nasal para recién nacidos retira rápida y convenientemente todo exceso de mucosidad, para que el bebé pueda respirar otra vez sin dificultad. Fabricado sin BPA.

- 1 Coloque los dedos como se muestra y apoye el pulgar en la parte inferior del aspirador (vea la foto). Apriete el aspirador para eliminar el aire en su interior.
- 2 Sostenga al bebé en posición erguida y coloque suavemente la punta dentro de la nariz, de modo que apunte parcialmente hacia arriba o hacia abajo, pero no directamente hacia el centro de la fosa nasal.

3 Presione la pera y libere suavemente la presión. La succión retirará el exceso de mucosidad de la fosa nasal del bebé. Repita en el otro orificio nasal.

Para Limpiar:

Enjuagar en agua caliente con jabón antes del primer uso y después de cada uso. Enjuagar ambos la punta y el bombillo con agua caliente con jabón. Permitar que se soque completamente asegurándose que todo el agua antes de usar de nuevo. NO lo seque en un horno de microondas.

PRECAUCIÓN: NUNCA PRESIONE DEMASIADO EL ASPIRADOR EN LA FOSA NASAL Y SÉQUELO SIEMPRE DESPUÉS DE CADA USO. NO LO UTILICE **NUNCA** EN LA BOCA O EN EL OÍDO DEL BEBÉ. GUÁRDELO EN UN LUGAR ALEJADO DEL CALOR Y LA LUZ BRILLANTE.

Termómetro digital con estuche

El mango blando y contorneado del cepillo de dientes para niños permite que las manos pequeñas lo sujeten más fácilmente. Las cerdas suaves y finas del cepillo son sumamente delicadas con los dientes y las encías sensibles del niño. Colóquelo sobre la mesa o lavabo y el conveniente mango estabilizador evita que el cepillo ruede y se caiga.

Su hijo puede comenzar a utilizar el cepillo de dientes para niños una vez que tenga todos los dientes de leche o cuando se lo recomiende el dentista. Coloque una pequeña cantidad de pasta dentífrica y permita que su hijo se cepille durante 2 a 3 minutos con movimientos ascendentes y descendentes. Ayude y supervise a su hijo durante el cepillado y no permita que trague la pasta dentífrica. **NOTA:** Los cepillos de dientes deben reemplazarse cada 2 ó 3 meses. Fabricado sin BPA.

Para limpiar: Enjuague completamente el cepillo antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso.

Nota importante: El dentista de su familia es quien debe responder las preguntas sobre la salud dental de su hijo.

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE EL NIÑO CAMINE O CORRA MIENTRAS UTILIZA EL CEPILLO DE DIENTES. NO DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON LOS CEPILLOS DE DIENTES.

5 toallitas de alcohol

Las toallitas de alcohol se proveen para ayudar a mantener el termómetro limpio y desinfectado. Tome un paño embebido en alcohol del paquete y limpie el termómetro después del uso para que quede listo para ser utilizado nuevamente. Deseche el paño después de utilizarlo.

SOLO PARA USO EXTERNO.

Tarjeta de información en caso de emergencia

Permite anotar números de teléfono e información médica importante para referencia ávida.

Termómetro digital con estuche

El termómetro digital Safety 1st toma una temperatura clara y precisa. Eficaz en uso oral, rectal o axilar. **NOTA:** Fahrenheit únicamente (excepto para los modelos IH246 y IH247, que utilizan grados centígrados).

©2024 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles, colors, and labeling may vary. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 – Fono: 4413029 – www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 01/24 4358-5237E



ADVERTENCIA:

LEA ESTA INFORMACIÓN ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL TERMÓMETRO DIGITAL.

- Este **NO** es un termómetro de oído. **NUNCA** coloque la sonda en el oído. Mida la temperatura debajo del brazo, por vía oral o rectal.
- Es un dispositivo electrónico delicado que se puede dañar si no se utiliza correctamente bajo supervisión de los padres.
- **NUNCA** permita que un niño lo use por sí solo o sin supervisión de los padres.
- **NO** exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz solar directa o golpes.
- Evite los impactos repentinos y el polvo.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede resultar fatal. La batería no debe volver a cargarse ni exponerse a temperaturas muy altas, ya que podría explotar.

LEA ESTA INFORMACIÓN ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL TERMÓMETRO DIGITAL:

- No permita que el termómetro sea masticado y no lo doble.
- Asegúrese de que el termómetro haya estado a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de su uso.

Importante información:

- La fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente en el caso de niños pequeños. Por favor consulte a su médico.
- No permita que los niños se tomen la temperatura sin supervisión de un adulto.
- Lea atentamente estas instrucciones para asegurar lecturas de temperatura precisas. Las lecturas de temperatura son afectadas por muchos factores, tales como el ejercicio físico o el beber bebidas calientes o frías, si se los realiza antes de medir la temperatura. Los resultados también dependen de la técnica empleada.
- No permita que los niños caminen o corran mientras se les toma la temperatura. La sonda podría causarles daño.

Cómo cuidar este producto:

- Limpie la punta del termómetro y la sonda utilizando alcohol isopropílico o agua y jabón después de cada uso.
- El termómetro es resistente al agua (no a prueba de agua) para facilitar la limpieza.
- Cuando no utilice la unidad, guárdela en su estuche protector.
- No lo guarde en sitios con luz solar directa o de altas temperaturas.
- No deje caer el termómetro, ya que podría dañarse.

¿Qué valor de temperatura es el normal?

Las lecturas de temperatura varían entre diferentes personas y según la parte del cuerpo donde se toma la lectura. La temperatura rectal tiende a ser aproximadamente 1° más alta que la temperatura oral y 2° más alta que la temperatura axilar para el mismo individuo.

La temperatura “normal” se refiere a la temperatura promedio de cada persona, mientras está bien. Es posible que desee medir y registrar la temperatura de su bebé varias veces cuando esté bien, para tener una línea de base de lo que es normal para su propio hijo. En promedio, los rangos de temperatura son los siguientes:

| Temperatura Método | Normal Límite | Fiebre Límite |
|--------------------|---------------|---------------|
| Rectal: | 98° a 100.3°F | 100.4°F o más |
| Oral: | 97° a 99.5°F | 99.6°F o más |
| Axilar: | 96° a 98.5°F | 98.6°F o más |

Cómo tomar la temperatura:

- 1 Seleccione un lugar de medición (rectal, oral o debajo del brazo), de acuerdo con cada persona en quién deba medir la temperatura.
- 2 Oprima el botón de encendido/apagado ubicado en la tapa. La pantalla del termómetro mostrará: “188.8 °F”. Ésta es una función de verificación e indica que la unidad está funcionando correc “▼” tamente. El termómetro indicará L°F y comenzará a medir la temperatura al ser expuesto al calor corporal.
- 3 El símbolo °F parpadeará continuamente hasta que se complete el proceso de medición de temperatura. Recuerde que el símbolo “▼” indica batería baja. El mensaje “ERR” en la pantalla indica que su unidad no está funcionando correctamente. Si el indicador de batería baja aparece en la pantalla, no se registrará una lectura precisa de la temperatura.
- 4 Al alcanzar la temperatura máxima, el símbolo °F dejará de parpadear.
- 5 Lea y anote la temperatura y la hora a modo de referencia.
- 6 Oprima el botón de encendido/apagado para apagar la unidad. Si usted no apaga la unidad, ésta se apagará automáticamente al cabo de unos 10 minutos.
- 7 Limpie la punta del termómetro y la sonda tal como se recomienda.

Uso rectal: (Para bebés y niños pequeños)

- Lubrique la punta de la sonda con lubricante soluble en agua o con vaselina.
- Intente colocar al niño boca abajo sobre su regazo. Inserte suavemente la punta de la sonda no más de 1/2 pulgada (1.3 cm) en el recto. En caso de encontrar resistencia a la inserción del termómetro, no fuerce la punta dentro del recto.
- La temperatura máxima debe obtenerse en unos 60 segundos.
- Para comprar fundas de termómetros (opcional), comuníquese con el Departamento de Atención al cliente llamando al (800) 544-1108 y solicite la pieza número 49520.




Uso oral: (Para niños de 4 años de edad en adelante.)

- No tome bebidas calientes o frías, no haga ejercicio físico y no realice otras actividades que puedan aumentar o reducir la temperatura medida en comparación con la temperatura media normal. La boca debe permanecer cerrada hasta 5 minutos antes de leer la temperatura medida.
- Coloque la punta de la sonda debajo de la lengua.
- Indique al niño que no muerda la sonda.
- La temperatura máxima debe obtenerse en unos 60 segundos. Si al tomar la temperatura la boca se abre, puede requerirse más tiempo de medición.

Uso debajo del brazo (axilar): (Para niños que no quieren cooperar al tomarles la temperatura oral o rectal)

- Limpie la axila con una toalla seca.
- Coloque la punta de la sonda debajo del brazo y presiónelo contra el cuerpo. De ser posible, el termómetro debe apuntar en la misma dirección que el cuerpo.
- El tiempo requerido para una medición debajo del brazo es de 90 segundos o más, según la colocación de la sonda y la presión del brazo contra el cuerpo.

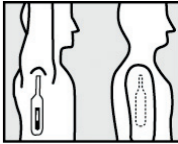



Información de la batería:

- Batería sin mercurio de larga duración, reemplazable (hasta 6000 lecturas de temperatura, aproximadamente).
- Batería reemplazable de larga duración (aproximadamente 2000 temperaturas).
- El indicador de batería baja “▼” aparece en la parte inferior derecha de la pantalla cuando la batería está agotada.

Información importante sobre la batería:

- Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- Para una mayor duración, recomendamos pilas alcalinas.

Tipo de batería: 1X LR41 (incluida)

  Recicle o deseche las pilas de forma segura, de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.


PRECAUCIÓN:

PARA EVITAR FUGAS DE LAS BATERÍAS • Siga siempre con cuidado las instrucciones. Utilice únicamente las pilas especificadas. Asegúrese de insertar las baterías con la polaridad correcta. • Retire del producto las baterías agotadas. • No conecte en corto circuito las terminales de alimentación. • Retire las baterías cuando las almacene sin uso durante períodos prolongados. • **BATERÍAS RECARGABLES:** Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de cargarlas. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No recargar baterías no recargables.

Límites de medición: 89.6°F a 111.2 °F.

Precisión de la medición:

0.2°F de 93.2 °F a 107.6 °F, a una temperatura ambiente de 64.4 °F a 82.4 °F.

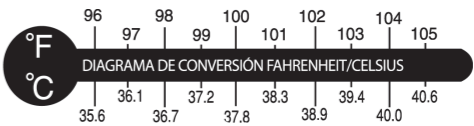



Garantía limitada de un año para el termómetro digital

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (termómetro digital) está libre de defectos de material y mano de obra cuando se usa en condiciones normales durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. En caso que el producto contenga defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc., reparará o reemplazará sin cargo el producto, a nuestra elección. El comprador será responsable de todos los costos asociados con el empaque y el envío del producto al Departamento de Atención al Consumidor de Dorel Juvenile Group en la dirección que se indica en la página opuesta, así como todos los demás costos de flete o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de envío del producto reparado o sustituido al comprador. El producto debe devolverse en su empaque original acompañado de un comprobante de compra, ya sea un recibo o cualquier otra prueba de que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si el producto se ha dañado como resultado de un mal uso.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes.

SEN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.