

Respirador de Media Cara **Advantage® 900 de MSA**



Protección del usuario y control de la fuente—con todas las Ventajas de los Respiradores Elastoméricos

El respirador de media cara elastomérico Advantage 900 de MSA ofrece a los profesionales de la salud una solución respiratoria innovadora y segura. Con la eliminación de la válvula de exhalación, el respirador elastomérico Advantage 900 logra el control de la fuente filtrando la respiración exhalada para ayudar a reducir la probabilidad de contaminar el área circundante. También permite la protección del usuario hasta el nivel P100 y está diseñado para una fácil limpieza y descontaminación. Para el sector de la salud, el respirador elastomérico Advantage 900 de MSA ofrece una alternativa rentable y ecológica a las mascarillas de respiración filtrantes desechables.



PROTECCIÓN DE USUARIOS Y CONTROL DE LA FUENTE

Se dispone de un nivel de protección del usuario de hasta P100. La eliminación de la válvula de exhalación proporciona la filtración de la respiración exhalada.



ALTA COMPRESIÓN DEL HABLA

El diafragma para hablar mecánico incluido ayuda a clarificar y amplificar el habla.

WE KNOW WHAT'S AT STAKE.





FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Con sólo tres componentes clave, la limpieza y desinfección de las máscaras se simplifica. Una máscara reutilizable reduce los residuos en comparación con las mascarillas de respiración filtrantes.




P/N 815369
Filtros P100

P/N 10146939
Filtros P100 con protector
contra salpicaduras

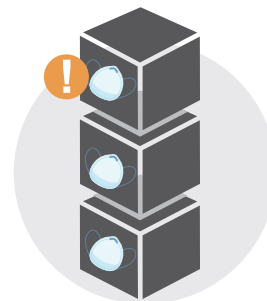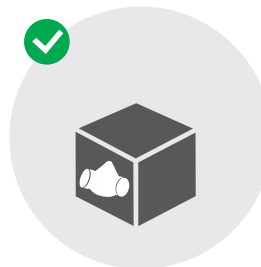

REDUCCIÓN DEL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

Los respiradores elastoméricos reutilizables pueden ocupar una fracción del espacio de almacenamiento necesario para almacenar las mascarillas de respiración N95 desechables.

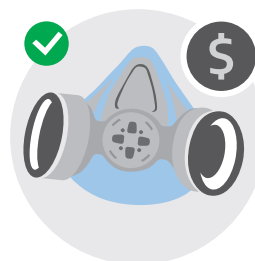

MENOR COSTO TOTAL DE ADQUISICIÓN

Un análisis comparativo de costos¹ determinó que los respiradores de media cara elastoméricos reutilizables son menos costosos de almacenar que las mascarillas desechables.

Por favor, tenga en cuenta: el Advantage 900 está aprobado para su uso sólo con cartuchos de filtro de partículas de estilo Advantage. No está aprobado para su uso con cartuchos flexibles, químicos o combinados.

¹Baracco, G., Eisert, S., Eagan, A., & Radonovich, L. 2015. Costo comparativo del almacenamiento de varios tipos de dispositivos de protección respiratoria para proteger a los profesionales de la salud durante una pandemia de influenza. Medicina de catástrofes y preparación de la salud pública, 9(3), 313-318. doi:10.1017/dmp.2015.12.

Nota: Este boletín sólo contiene una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen de forma general los usos y las capacidades de rendimiento de los productos, éstos no deben ser utilizados, bajo ninguna circunstancia, por personas no capacitadas o no calificadas. Los productos no deben utilizarse hasta que se haya leído y comprendido completamente el manual de instrucciones/usuario del producto, que contiene información detallada sobre el uso y los cuidados adecuados de los productos, incluidas las advertencias o precauciones. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MSA opera en más de 40 países de todo el mundo. Para encontrar una oficina de MSA cerca de usted, visite [MSAafety.com/offices](https://www.MSAafety.com/offices).